



## **Periscope™ Dissector**

Instructions for Use - English

## **Periscope™ Dissektor**

Gebrauchsanweisung - Deutsch

## **Spatule Periscope™ pour la tunélation des tissus**

Mode d'emploi - Français

## **Dissettore Periscope™**

Istruzioni per l'uso - Italiano

## **Dissector Periscope™**

Instrucciones de uso - Español

## **Dissector Periscope™**

Instruções de Utilização - Português

## **Periscope™-dissektor**

Brugervejledning – dansk

## **Periscope™-dissektor**

Bruksanvisning – Svenska

## **Periscope™-dissector**

Gebruiksaanwijzing - Nederlands

## **Periscope™ Dissector**

Οδηγίες χρήσης - Ελληνικά

**Periscope™ Dissector**

## **Periscope™ Dissector**

(Model Numbers 4200-00, e4200-00)

Remote Endarterectomy Device

Instructions for Use - English

**STERILE EO**

### **Device Description**

The Periscope™ Dissector consists of two principal components, a shaft with an angled spatula at the distal end and a hollow flexible needle running the full length of the shaft to the spatula. The shaft and angled spatula are constructed of stainless steel while the hollow needle is made of nickel titanium. The inner lumen of the shaft extends from the handle to the palm of the spatula.

The Periscope Dissector is available in one size. The useable length of the spatula/shaft is approximately 40 cm and the hollow needle can accommodate up to a 0.018" diameter guidewire.

### **Indications and Usage**

The Periscope Dissector is intended for remote intraluminal stripping of peripheral blood vessels during vascular reconstruction and to provide a conduit for guidewire placement.

General indications for peripheral vessel reconstruction include disabling claudication, ischemic pain at rest, ischemic skin lesions or gangrene.

Indications for endarterectomy specifically as a procedure for vessel reconstruction include localized lesions and heavy circumferential plaque deposits.

### **Contraindications**

- Contraindications include, but are not limited to:
- Any evidence of aneurysmal change or severe calcification may contraindicate endarterectomy since continued aneurysmal degeneration of the adventitia may be expected.
- In some cases, the vessel wall layers may be quite coherent and the plaque segment may be difficult to separate from the vessel wall. When the vessel is in this state of disease, it is often advisable to abandon endarterectomy and consider an alternative method of vascular reconstruction.
- Use of this device is contraindicated in the coronary, internal carotid arteries and other vessels of the central circulatory system.

### **Warnings and Precautions**

The Periscope Dissector may only be used by physicians trained in vascular surgery, specifically endarterectomy procedures. The techniques described herein are offered to clinicians as a guide.

#### **Periscope Dissector - Handling Precautions**

Always inspect the sterile packaging before use. If the packaging is damaged, do not use the product and contact your LeMaitre Vascular representative.

Do not re-sterilize the Periscope Dissector or the hollow needle.

The Periscope Dissector must be used prior to the "Use By" date printed on the package.

#### **Periscope Dissector - Use Precautions**

Always use fluoroscopy when advancing or manipulating endovascular devices. Do not attempt to forcibly advance the Periscope Dissector.

Confirm that the Periscope Dissector is properly oriented and the tip of the hollow needle remains retracted within the shaft while advancing the device into the vessel.

Use of the Periscope Dissector may lead to vessel perforation requiring additional interventional procedures (e.g., bypass graft surgery of the artery).

### **Potential Adverse Events**

Adverse events potentially associated with the use of the Periscope Dissector (e.g., all complications associated with PTA, remote endarterectomy or atherectomy procedures,) include but are not limited to the following:

- Incisional/puncture site inflammation, hematoma or bleeding

- Wound infection (incisional)
- Vessel injury, dissection, perforation, rupture or pseudoaneurysm
- Vessel spasm
- Emboli, thrombosis or acute occlusion
- Fever, drug reactions or allergic reactions to contrast medium
- Conversion to bypass
- Limb loss due to distal embolization
- Renal failure
- Death

### **How Supplied**

**STERILE:** Each Periscope Dissector is sterilized using Ethylene Oxide (EO) and is supplied sterile for single use only. Do not reuse or resterilize. Resterilization may adversely affect proper mechanical function and could result in patient injury.

#### **CONTENTS:**

One (1) Sterile Periscope Dissector with an Integrated Hollow Needle

One (1) Instructions for Use

**STORAGE:** Store in a cool, dry place.

### **Inspection**

Carefully inspect the sterile package for damage or defects before opening. Do not use product after the "Use By" date on the package. If the integrity of the sterile package has been compromised or the package or product is defective, do not use the product and contact LeMaitre Vascular for return information.

### **Recommended Material**

Prepare the following material using sterile technique:

- 10cc syringe filled with sterile saline
- Up to a 0.018" guidewire of appropriate length
- 10cc syringe filled with sterile contrast solution

### **Directions For Use**

Specific patient preparation and procedural techniques are determined by the physician. One suggested technique is as follows:

1. Patient preparation and administration of anticoagulation/antiplatelet regimen is left to the discretion of the physician.
2. Use sterile surgical precautions and standards.
3. Using appropriate anesthesia, gain access at the appropriate site through an arteriotomy to expose the atheroma.
4. Make a slanting, bevel-type incision of the proximal atheroma to start a cleavage plane between the atheroma and surrounding media.


*Note:* *The following procedure steps should be performed under fluoroscopic guidance.*

5. Insert the Periscope Dissector into the cleavage plane of the vessel. Using a gentle pushing motion around the atheroma core, advance the device to a point distal to the occluded segment.
6. Under fluoroscopic guidance, position the Periscope Dissector at the end of the dissection plane.
7. While advancing the needle, flush the needle with contrast medium under fluoroscopy to verify proper penetration of the intimal layer into the true lumen of the vessel.
8. Insert a 0.018" guidewire into the Periscope Dissector needle and advance until the distal tip of the wire is sufficiently anchored into the true vessel lumen. Anchoring of the guidewire will allow retraction of the Periscope Dissector while maintaining guidewire position.

*Note:*

1. *Do not use polymer covered hydrophilic guidewires.*
2. *Optimum guidewire performance is achieved with the use of flex wires or wires with very long flexible tips.*

9. Retract the needle and remove the Periscope Dissector from the patient while maintaining guidewire position.
10. Following completion of the remote endarterectomy procedure, maintain guidewire position to facilitate additional interventional procedures as required.
11. Close arteriotomy using standard procedure.

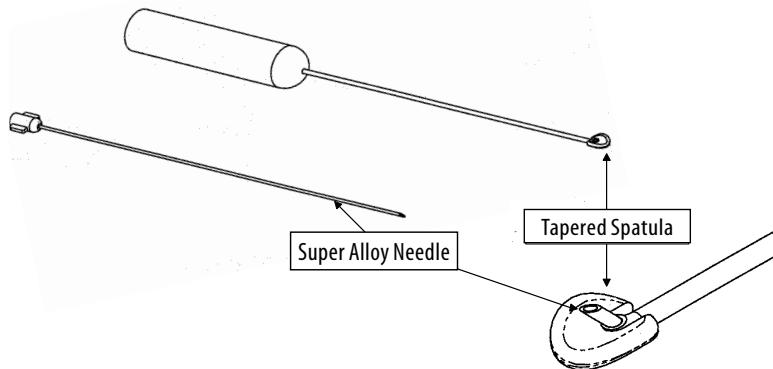

#### **Resterilization/Re-use**

This device is single-use only. Do not reuse, reprocess, or re-sterilize. The cleanliness and sterility of the re-processed device cannot be assured. Reuse the device may lead to cross contamination, infection, or patient death. The performance characteristics of the device may be compromised due to reprocessing or re-sterilization since the device was only designed and tested for single use. The shelf life of the device is based on single use only.

#### **Limited Product Warranty; Limitation of Remedies**

LeMaitre Vascular, Inc. warrants that reasonable care has been used in the manufacture of this device. Except as explicitly provided herein, LEMAITRE VASCULAR (AS USED IN THIS SECTION, SUCH TERM INCLUDES LEMAITRE VASCULAR, INC., ITS AFFILIATES, AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, MANAGERS, AND AGENTS) MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DEVICE, WHETHER ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND HEREBY DISCLAIMS THE SAME. LeMaitre Vascular makes no representation regarding the suitability for any particular treatment in which this device is used, which determination is the sole responsibility of the purchaser. This limited warranty does not apply to the extent of any abuse or misuse of, or failure to properly store, this device by the purchaser or any third party. The sole remedy for a breach of this limited warranty shall be replacement of, or refund of the purchase price for, this device (at LeMaitre Vascular's sole option) following the purchaser's return of the device to LeMaitre Vascular. This warranty shall terminate on the expiration date for this device.

IN NO EVENT SHALL LEMAITRE VASCULAR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY OF LEMAITRE VASCULAR WITH RESPECT TO THIS DEVICE, HOWEVER ARISING, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, EXCEED ONE THOUSAND DOLLARS (US\$1,000), REGARDLESS OF WHETHER LEMAITRE VASCULAR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. THESE LIMITATIONS APPLY TO ANY THIRD-PARTY CLAIMS.

A revision or issue date for these instructions is included on the back page of these Instructions for Use for the user's information. If twenty-four (24) months has elapsed between this date and product use, the user should contact LeMaitre Vascular to see if additional product information is available.

## **Periscope™ Dissektor**

(Modellnummern 4200-00, e4200-00)

Instrument zur halb geschlossenen Endarteriektomie

Gebrauchsanweisung - Deutsch

**STERILE EO**

### **Beschreibung des Instruments**

Der Periscope™ Dissektor besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Schaft mit einem abgewinkelten Spatel am distalen Ende und einer flexiblen Hohlnadel entlang der gesamten Länge des Schafths bis zum Spatel. Der Schaft und der abgewinkelte Spatel sind aus Edelstahl und die Hohlnadel ist aus Nickel-Titan gefertigt. Das Lumen des Schafths erstreckt sich vom Griff bis zur Spatelfläche.

Der Periscope Dissektor ist in einer einzigen Größe erhältlich. Die nutzbare Länge von Spatel/Schaft beträgt ca. 40 cm und die Hohlnadel kann einen Führungsdrat mit einem Durchmesser von bis zu 0,018" aufnehmen.

### **Indikationen und Verwendung**

Der Periscope Dissektor ist für die intraluminale Entfernung peripherer Blutgefäße während der Gefäßrekonstruktion und für die Bereitstellung eines Kanals zur Platzierung des Führungsdräts vorgesehen.

Allgemeine Indikationen für die Rekonstruktion peripherer Gefäße umfassen schwere Klaudikation, ischämische Ruheschmerzen, ischämische Hautläsionen oder Gangrän. Indikationen für Endarteriektomie als Verfahren für die Gefäßrekonstruktion umfassen lokale Läsionen und schwere periphere Plaque-Ablagerungen.

### **Gegenindikationen**

Gegenindikationen sind u. a.:

- Indizien für eine aneurismatische Änderung oder schwere Verkalkung kontraindizieren möglicherweise Endarteriektomie, da eine weitere aneurismatische Degenerierung der Adventitia eintreten kann.
- In einigen Fällen können die Gefäßwandschichten kohärent sein, sodass das Plaque-Segment möglicherweise schwierig von der Gefäßwand zu lösen ist. Wenn das Gefäß dieses Krankheitsstadium aufweist, empfiehlt es sich häufig, auf Endarteriektomie zu verzichten und eine alternative Methode der Gefäßrekonstruktion in Betracht zu ziehen.
- Die Verwendung dieses Instruments ist für Kranzgefäße, die Arteria carotis interna und andere Gefäße des zentralen Kreislaufsystems gegenindiziert.

### **Warnungen und Vorsichtshinweise**

Der Periscope Dissektor darf nur von Ärzten verwendet werden, die über eine gefäßchirurgische Ausbildung, insbesondere für Endarteriektomieverfahren, verfügen. Die hier beschriebenen Methoden werden Ärzten als allgemeiner Leitfaden angeboten.

### **Periscope Dissektor – Vorsichtshinweise zur Handhabung**

Vor der Verwendung immer die sterile Verpackung überprüfen. Wenn die Verpackung beschädigt ist, das Produkt nicht verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an die LeMaitre Vascular-Vertretung.

Den Periscope Dissektor oder die Hohlnadel nicht resterilisieren.

Der Periscope Dissector muss vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.

### **Periscope Dissektor – Vorsichtshinweise zur Verwendung**

Verwenden Sie immer Fluoroskopie, wenn Sie endovaskuläre Instrumente vorwärts führen oder manipulieren. Drücken Sie den Periscope Dissektor nicht mit Gewalt vorwärts.

Vergewissern Sie sich, dass der Periscope Dissektor ordnungsgemäß ausgerichtet ist und dass die Spitze der Hohlnadel im Schaft bleibt, während das Instrument in das Gefäß geschoben wird.

Die Verwendung des Periscope Dissektors kann zu Gefäßperforation führen und in diesem Fall weitere Eingriffe (z. B. Bypassgraftoperation der Arterie) erfordern.

## **Mögliche unerwünschte Ereignisse**

Bei der Verwendung des Periscope Dissektors können u. a. folgende unerwünschte Ereignisse (z. B. alle Komplikationen im Zusammenhang mit PTA, Endarteriektomie oder Atherektomie) auftreten:

- Entzündung, Hämatom oder Blutung an Einschnitt-/Punktionsstelle
- Wundinfektion (inzisional)
- Gefäßverletzung, -sektion, -perforation, -ruptur oder Pseudoaneurysmen
- Gefäßspasmus
- Embolien, Thrombose oder akuter Verschluss
- Medikamentenreaktion oder allergische Reaktionen auf Kontrastmittel
- Wechsel zu Bypass
- Extremitätenverlust aufgrund distaler Embolie
- Nierenversagen
- Exitus

## **Bereitstellungsform**

**STERIL:** Jeder Periscope Dissektor ist mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert und wird steril für die Einmalverwendung geliefert. Nicht wiederverwenden oder resterilisieren. Eine Resterilisierung kann zu einer fehlerhaften mechanischen Funktion sowie zur Verletzung des Patienten führen.

### **PACKUNGSHALT:**

Ein (1) steriler Periscope Dissektor mit integrierter Hohlnadel

Eine (1) Gebrauchsanweisung

**LAGERUNG:** Kühl und trocken lagern.

## **Überprüfung**

Die sterile Verpackung vor dem Öffnen sorgfältig auf Schäden oder Defekte überprüfen. Das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwenden. Wenn die sterile Verpackung nicht intakt ist oder wenn die Verpackung oder das Produkt defekt ist, das Produkt nicht verwenden. Erkundigen Sie sich bei LeMaitre Vascular nach den Rückgabebedingungen.

## **Empfohlenes Material**

Präparieren Sie das folgende Material mit sterilen Verfahren:

- Mit steriler Kochsalzlösung gefüllte 10-cc-Spritze
- Führungsdrat geeigneter Länge mit Durchmesser von bis zu 0,018"
- Mit steriler Kontrastlösung gefüllte 10-cc-Spritze

## **Gebrauchsanweisung**

Die Vorbereitung des Patienten und die verfahrenstechnischen Einzelheiten werden vom Arzt bestimmt. Eines der empfohlenen Verfahren umfasst folgende Schritte:

1. Die Vorbereitung des Patienten und die Verabreichung von Gerinnungshemmern/Thrombozytenaggregationshemmern erfolgen nach Ermessen des Arztes.
2. Verwenden Sie sterile chirurgische Vorsichtsmaßnahmen und Standards.
3. Verschaffen Sie sich unter Verwendung geeigneter Anästhesie über eine Pulsader Zugang zu der betreffenden Stelle, um das Atherom freizulegen.
4. Führen Sie am proximalen Atherom eine schräge Inzision durch, um zwischen Atherom und dem umgebenden Medium eine Spaltungsebene herzustellen.

*Hinweis: Die folgenden Schritte sollten unter Verwendung von Fluoroskopie erfolgen.*


5. Führen Sie den Periscope Dissektor in die Spaltungsebene des Gefäßes ein. Schieben Sie das Instrument mit einer sanft drückenden Bewegung um den Atheromkern an eine Position auf der distalen Seite des verschlossenen Segments.
6. Positionieren Sie den Periscope Dissektor unter Verwendung von Fluoroskopie am Ende der Sektionsfläche.

7. Während Sie die Nadel nach vorne drücken, spülen Sie die Nadel unter Fluoroskopie mit Kontrastmittel, um das ordnungsgemäße Eindringen der Intimaschicht in das echte Lumen des Gefäßes sicherzustellen.
8. Führen Sie einen 0,018"-Führungsdräht in die Nadel des Periscope Dissektors ein und schieben Sie ihn nach vorne, bis die distale Spitze des Drahtes ausreichend im echten Lumen verankert ist. Die Verankerung des Führungsdrähtes ermöglicht das Herausziehen des Periscope Dissektors, während die Position des Führungsdrähtes beibehalten wird.

**Hinweis:**

1. *Verwenden Sie keine hydrophilen Führungsdrähte mit Polymerbeschichtung.*
2. *Ein optimales Führungsdrähtverhalten wird mit flexiblen Drähten oder Drähten mit sehr langen flexiblen Spitzen erreicht.*

9. Ziehen Sie die Nadel heraus und entfernen Sie den Periscope Dissektor vom Patienten, lassen Sie jedoch die Position des Führungsdrähtes unverändert.
10. Behalten Sie nach dem Abschluss der Endarterietomie die Führungsdrähtposition bei, um ggf. weitere Eingriffe zu erleichtern.
11. Schließen Sie die Pulsader mit dem Standardverfahren.

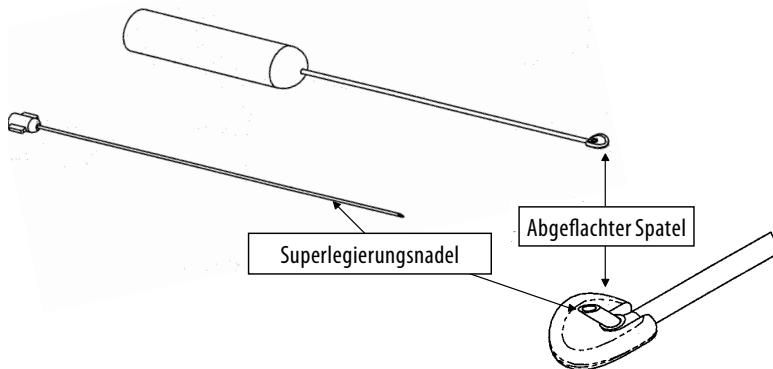

### **Restertilisierung/Wiederverwendung**

Das Gerät ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Es darf weder wiederverwendet, wiederaufbereitet noch resterilisiert werden. Die Sauberkeit und Sterilität des wiederaufbereiteten Geräts kann nicht garantiert werden. Eine Wiederverwendung des Geräts kann zur Querkontamination, Infektion oder zum Tod des Patienten führen. Aufgrund einer Wiederaufbereitung oder Restertilisierung kann die Leistungsfähigkeit des Geräts beeinträchtigt werden, da es nur für den Einmalgebrauch bestimmt und getestet wurde. Die Haltbarkeit des Geräts gilt nur für den Einmalgebrauch.

### **Eingeschränkte Produktgarantie; Einschränkung der Rechtsmittel**

LeMaitre Vascular Inc. gewährleistet, dass bei der Herstellung dieses Geräts angemessene Sorgfalt angewandt wurde. Außer den hier genannten Garantien SCHLIESST LEMAITRE VASCULAR (DIESE BEZEICHNUNG SCHLIESST HIERIN LEMAITRE VASCULAR, INC., DESSEN TOCHTERUNTERNEHMEN UND DEREN MITARbeiter, BEVOLLMÄCHTIGTE, DIREKToren, FÜHRUNGSKRÄFTE UND VERTRETER EIN) IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM GERÄT ALLE ANDEREN GARANTien AUS, UNABHÄNGIG DAVON, OB ES SICH UM GESETZLICH ODER ANDERWEITIG AUSDRÜCKLICH UND STILLSCHWEIGEND GEWÄHRTE GARANTien HANDELT, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTien DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

LeMaitre Vascular macht keine Angaben in Bezug auf die Eignung für spezielle Behandlungen, bei denen dieses Produkt benutzt wird. Die Beurteilung dessen liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Diese eingeschränkte Garantie wird nichtig im Falle jeglichen Missbrauchs oder unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung dieses Produktes durch den Käufer oder Dritte. Die einzige Abhilfe bei Eintreten des Garantiefalls ist der Austausch des Produkts oder die Erstattung des Kaufpreises dieses Produkts (nach alleiniger Entscheidung von LeMaitre Vascular) nach Rückgabe des Produkts durch den Käufer an LeMaitre Vascular. Diese Garantie endet mit Ablauf des Haltbarkeitsdatums dieses Produkts.

IN KEINEM FALL HAFTET LEMAITRE VASCULAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, STRAFRECHLICHE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN. DIE GESAMTE HAFTUNG VON LEMAITRE VASCULAR IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM GERÄT BETRÄGT HÖCHSTENS EINTAUSEND US-DOLLAR (1.000 USD), UNABHÄNGIG DAVON, OB DER SCHADEN DURCH EINEN HAFTUNGSANSPRUCH, VERTRAGSGEMÄSS, DURCH EINE VERTRAGSVERLETZUNG, HAFTUNG ODER AUF EINE ANDERE WEISE ENTSTANDEN IST, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB LEMAITRE VASCULAR ÜBER EINEN MÖGLICHEN ENTSPRECHENDEN SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, SOWIE UNGEACHTET DESSEN, OB EIN RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLT. DIESE ANGABEN GELTEN FÜR ALLE ANSPRÜCHE VON DRITTFIRMEN.

Auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung sind zur Information des Anwenders ein Änderungs- oder ein Veröffentlichungsdatum für diese Gebrauchsanweisung angegeben. Wenn zwischen diesem Datum und der Verwendung des Produkts vierundzwanzig (24) Monate verstrichen sind, sollte der Anwender bei LeMaitre Vascular nachfragen, ob zusätzliche Produktinformationen vorliegen.

## **Spatule Periscope™ pour la tunélation des tissus**

(Numéros de modèle 4200-00, e4200-00)

Appareil d'endartériectomie à distance

Mode d'emploi – Français

**STERILE EO**

### **Description de l'appareil**

La spatule Periscope™ pour la tunélation des tissus se compose de deux éléments principaux, une tige accompagnée d'une spatule coudée sur l'extrémité distale et une aiguille creuse flexible sur toute la longueur de la tige jusqu'à la spatule. La tige et la spatule coudée sont en acier inoxydable, tandis que l'aiguille creuse est en nickel-titanium. La lumière interne de la tige s'étend du manche à la palme de la spatule.

La spatule Periscope™ pour la tunélation des tissus existe en une seule taille. La longueur utilisable de la spatule/tige est de 40 cm environ et l'aiguille creuse peut loger un fil-guide de 0,018" de diamètre maximum.

### **Indications et utilisation**

La spatule Periscope pour la tunélation des tissus est destinée à l'éveinage intracavitaire des vaisseaux sanguins périphériques pendant la reconstruction vasculaire et fournit un conduit permettant de placer le fil-guide.

Les indications générales pour la reconstruction des vaisseaux périphériques sont une claudication invalidante, des douleurs ischémiques au repos, des lésions cutanées ischémiques ou une gangrène. Le recours à l'endartériectomie comme mesure de reconstruction des vaisseaux est indiqué dans le cas de lésions localisées et de dépôts lourds de plaques circonférentielles.

### **Contre-indications**

Liste non limitative de contre-indications :

- Toute indication de changement anévrismal ou de calcification sévère peut constituer une contre-indication à l'utilisation de l'endartériectomie, car elle entraîne un risque de dégénérescence anévrismale continue de l'adventice.
- Dans certains cas, la cohésion des couches de la paroi du vaisseau peut être importante, rendant le segment de plaques difficile à séparer de la paroi du vaisseau. Lorsque le vaisseau est malade, il est souvent recommandé d'abandonner l'endartériectomie et d'opter pour une méthode de reconstruction vasculaire alternative.
- L'utilisation de cet appareil est contre-indiquée dans les artères coronaires, les artères carotides internes ainsi que les autres vaisseaux du système circulatoire central.

### **Avertissements et mises en garde**

La spatule Periscope pour la tunélation des tissus est réservée à l'usage unique de médecins formés en chirurgie vasculaire et plus précisément en procédures d'endartériectomie. Les techniques décrites dans ce document s'adressent aux cliniciens et font office de guide.

### **Spatule Periscope pour la tunélation des tissus – Précautions de manipulation**

Inspectez systématiquement l'emballage stérile avant toute utilisation. Si l'emballage est abîmé, n'utilisez pas le produit et contactez votre représentant LeMaitre Vascular.

Ne stérilisez pas une nouvelle fois la spatule Periscope ou l'aiguille creuse.

La spatule Periscope pour la tunélation des tissus doit être utilisée avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### **Spatule Periscope pour la tunélation des tissus – Conseils d'utilisation**

Utilisez systématiquement la fluoroscopie lorsque vous introduisez ou manipulez des appareils endovasculaires. N'exercez pas de pression lorsque vous utilisez la spatule Periscope.

Assurez-vous que la spatule est bien orientée et que la pointe de l'aiguille creuse reste rétractée dans la tige au fur et à mesure que le dispositif progresse dans le vaisseau.

L'utilisation de la spatule Periscope peut entraîner la perforation des vaisseaux, nécessitant des interventions supplémentaires (par ex. : pontage de l'artère).

### **Effets secondaires éventuels**

Les effets secondaires potentiellement associés à l'utilisation de la spatule Periscope (par ex. : toutes les complications associées au PTA, à l'endartériectomie à distance ou aux procédures d'athérotomie) comprennent notamment :

- Inflammation du site d'incision/de ponction, hématome ou saignements
- Infection de la blessure (incision)
- Blessure, dissection, perforation, rupture ou pseudo-anévrisme du vaisseau
- Spasme du vaisseau
- Embolie, thrombose ou occlusion sévère
- Fièvre, réactions aux médicaments ou réactions allergiques au liquide de contraste
- Conversion au pontage
- Perte de membres suite à une embolisation distale
- Insuffisance rénale
- Décès

### **Mode d'approvisionnement**

**STÉRILE** : Chaque spatule Periscope est stérilisée avec de l'oxyde d'éthylène (EO) et est destinée à un usage unique. Ne jamais réutiliser ou restériliser. Une nouvelle stérilisation peut nuire au fonctionnement mécanique de la spatule et risque de blesser le patient.

### **CONTENU :**

Une (1) spatule stérile Periscope avec aiguille creuse intégrée

Un (1) mode d'emploi

**CONSERVATION** : Conservez à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### **Inspection**

Inspectez attentivement l'emballage stérile pour vérifier qu'il n'est pas abîmé et qu'il ne comporte pas de défauts avant de l'ouvrir. N'utilisez pas le produit au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage. Si l'intégrité de l'emballage stérile est compromise ou si le produit ou l'emballage est défectueux, n'utilisez pas le produit et contactez LeMaitre Vascular pour obtenir des informations.

### **Matériel recommandé**

Préparez le matériel suivant une technique de stérilisation :

- Seringue de 10 cc remplie de solution saline de stérilisation
- Fil-guide d'un diamètre maximum de 0,018" et de longueur appropriée
- Seringue de 10 cc remplie de solution saline de contraste

### **Consignes d'utilisation**

La préparation spécifique du patient et les techniques de la procédure sont déterminées par le médecin. Une technique possible pourrait être :

1. La préparation du patient et l'administration d'un régime anticoagulant/antiplaquettaire sont laissées à la discrétion du médecin.
2. Agissez avec précaution et en adoptant les normes de chirurgie stérile.
3. Anesthésiez de manière approprié et accédez au site adéquat par artériotomie de manière à exposer l'athérome.
4. Effectuez une incision sous forme de biseau incliné sur l'athérome proximal de manière à entamer un plan de clivage entre l'athérome et le liquide qui l'entoure.

*Remarque : Les étapes suivantes de la procédure doivent être réalisées sous contrôle fluoroscopique.*


5. Insérez la spatule Periscope dans le plan de clivage du vaisseau. Par pressions légères autour de l'athérome, avancez le dispositif jusqu'à un point distal du segment occlus.
6. Sous contrôle fluoroscopique, positionnez la spatule Periscope à l'extrémité du plan de dissection.
7. Au fur et à mesure de la progression de l'aiguille, injectez du produit de contraste sous fluoroscopie pour vous assurer de la bonne pénétration de la couche intime dans la lumière du vaisseau proprement dit.
8. Insérez un fil-guide de 0,018" de diamètre dans l'aiguille de la spatule Periscope et avancez-le jusqu'à ce que l'extrémité distale du fil soit suffisamment avancé à l'intérieur de la lumière du vaisseau proprement dit. L'ancre du fil-guide permet la rétraction de la spatule Periscope tout en maintenant la position du fil-guide.

*Remarque: 1. N'utilisez pas de fils-guide hydrophiles recouverts de polymère.*

*2. Pour une performance optimale du fil-guide, utilisez des guides flexibles ou à extrémité extra-souple suffisamment longs.*

9. Procédez à la rétraction de l'aiguille et retirez la spatule Periscope du patient tout en maintenant la position du fil-guide.
10. Après avoir mené la procédure d'endartériectomie à distance, maintenez la position du fil-guide de manière à faciliter toute intervention supplémentaire pouvant s'avérer nécessaire.

11. Fermez l'artéiotomie selon les procédures standards.

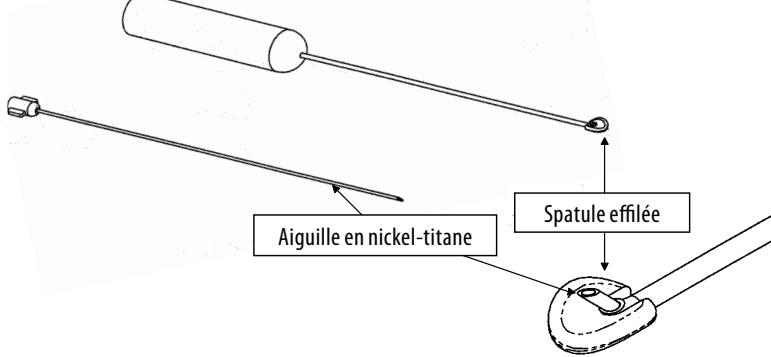

#### **Restérialisation/Réutilisation**

Ce dispositif est exclusivement à usage unique. Ne jamais réutiliser, reconditionner ou restériliser. La propreté et la stérilité d'un dispositif reconditionné ne peuvent être garanties. Le fait de réutiliser le dispositif peut engendrer des risques de contamination croisé, d'infection, voire de décès du patient. Les caractéristiques de performances du dispositif peuvent être compromises en cas de reconditionnement ou de restérialisation du dispositif, celui-ci n'ayant été conçu et testé qu'en vue d'un usage unique. La durée de conservation du dispositif tient compte d'un usage unique.

#### **Produit à garantie limitée, limitation des recours**

LeMaitre Vascular Inc. garantit que tous les soins possibles ont été apportés à la fabrication de ce dispositif. Sauf indications contraires dans le présent document, LEMAITRE VASCULAR (DÉSIGNANT DANS CETTE SECTION LEMAITRE VASCULAR, INC., SES FILIALES ET LEURS EMPLOYÉS, CADRES, DIRECTEURS, GÉRANTS ET AGENTS RESPECTIFS) N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT CE DISPOSITIF, QUE CE SOIT CONFORMÉMENT À LA LOI OU D'UNE AUTRE MANIÈRE (Y COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) ET LA DÉCLINE. LeMaitre Vascular ne cautionne en aucun cas l'adaptation de ce dispositif à un traitement particulier, laissant à l'acheteur la seule responsabilité de le déterminer. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout usage abusif, mauvaise utilisation ou conservation inappropriée de ce dispositif par l'acheteur ou par un tiers quelconque. Le seul recours pour violation de cette garantie limitée sera le remplacement ou le remboursement du prix d'achat de ce dispositif (à la discréction de LeMaitre Vascular) après retour par l'acheteur du dispositif à LeMaitre Vascular. Cette garantie cessera à la date de péremption de ce dispositif.

EN AUCUN CAS, LEMAITRE VASCULAR NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE EXEMPLAIRE, PARTICULIER, IMMATÉRIEL, INDIRECT OU DIRECT QUE CE SOIT. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LEMAITRE VASCULAR CONCERNANT CE DISPOSITIF, QUELLE QUE SOIT SA PROVENANCE, AU TITRE D'UN PRINCIPE QUELCONQUE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, EXTRAContractuelle, STRICTE OU AUTRE, NE DÉPASSERA LA SOMME DE MILLE DOLLARS (US\$1 000), MÊME SI LEMAITRE VASCULAR A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE, ET NONOBSTANT LE MANQUEMENT AU BUT ESSENTIEL DE TOUT RECOURS. CES LIMITATIONS S'APPLIQUENT À TOUTE RÉCLAMATION DE TIERS.

Une date de révision ou d'émission de ces instructions est renseignée à titre informatif pour l'utilisateur à la dernière page de ce document. Si vingt-quatre (24) mois se sont écoulés entre cette date et l'utilisation du produit, l'utilisateur contactera LeMaitre Vascular pour savoir si des informations supplémentaires sur le produit sont disponibles.

## **Dissettore Periscope™**

(codici modello 4200-00, e4200-00)

Dispositivo per endoartérectomia remota

Istruzioni per l'uso - Italiano

**STERILE EO**

### **Descrizione del dispositivo**

Il dissettore Periscope™ è costituito da due componenti principali: uno stelo con spatola angolare sull'estremità distale e un ago flessibile cavo che si estende dallo stelo alla spatola. Lo stelo e la spatola angola sono in acciaio inox, mentre l'ago cavo è in nichel-titanio. Il lume interno dello stelo si estende dall'impugnatura al palmo della spatola.

Il dissettore è disponibile in una sola dimensione. La lunghezza utile della spatola/dello stelo è di circa 40 cm e l'ago cavo può essere usato con fili guida di diametro massimo di 0,018".

### **Indicazioni e uso**

Il dissettore Periscope può essere usato per la rimozione intraluminale remota dei vasi sanguigni periferici durante la ricostruzione vascolare e come ausilio per il posizionamento del filo guida.

Le indicazioni generali per la ricostruzione dei vasi sanguigni periferici comprendono la claudicazione invalidante, il dolore ischemico a riposo, le lesioni ischemiche cutanee o cancrena. Le indicazioni per l'endoartérectomia, soprattutto se usata come procedura per la ricostruzione dei vasi sanguigni, comprendono lesioni localizzate e abbondanti depositi di placca lungo la circonferenza.

### **Controindicazioni**

- Le controindicazioni includono senza limitazione alcuna:
- In presenza di variazioni nell'aneurisma o di calcificazione grave è sconsigliabile procedere con l'endoartérectomia poiché non è possibile escludere la degenerazione continua dell'aneurisma sulla tunica avventizia.
- In alcuni casi è possibile che gli strati delle pareti dei vasi siano abbastanza coesi e che la separazione del segmento della placca dalla parete del vaso risulti difficoltosa. Se il vaso è in questo stato degenerativo, è spesso consigliabile rinunciare all'endoartérectomia e scegliere un metodo diverso per la ricostruzione vascolare.
- L'uso di questo dispositivo è sconsigliato per le arterie coronarie e carotidee interne, e per altri vasi del sistema circolatorio centrale.

### **Avvertenze e precauzioni**

Il dissettore Periscope può essere usato solo da medici esperti in chirurgia vascolare e in particolare nelle procedure di endoartérectomia. Le tecniche descritte in questo documento vengono fornite solo a titolo di riferimento.

### **Dissettore Periscope - Precauzioni per la manipolazione**

Ispezionare sempre la confezione sterile prima dell'uso. Se la confezione è danneggiata, non usare il dispositivo e rivolgersi a un rappresentante di LeMaitre Vascular.

Non risterilizzare il dissettore Periscope o l'ago cavo.

Utilizzare il dissettore Periscope entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

### **Dissettore Periscope - Precauzioni per l'uso**

Utilizzare sempre tecniche fluoroscopiche per far avanzare o inserire i dispositivi endovascolari. Non tentare di far avanzare con forza il dissettore Periscope.

Verificare che il dissettore Periscope sia orientato correttamente e che la punta dell'ago cavo rimanga ritratta nello stelo quando si spinge il dispositivo all'interno del vaso.

L'uso del dissettore Periscope può provocare la perforazione dei vasi e comportare quindi la necessità di effettuare altre procedure chirurgiche (come innesti di bypass arteriosi).

### **Possibili eventi avversi**

Gli eventi avversi associati con l'uso del dissettore Periscope (ossia tutte le complicanze associate con le procedure ATP, di endoarteriectomia remota o arterectomia) comprendono senza limitazione alcuna:

- Infiammazione del sito di incisione/di puntura, formazione di ematomi o sanguinamento
- Infezione della ferita (in caso di incisione)
- Lesione dei vasi, dissezione, perforazione, rottura o pseudoaneurisma
- Spasmo del vaso
- Emboli, trombosi o occlusione acuta
- Febbre, reazione ai farmaci o reazioni allergiche al mezzo di contrasto
- Necessità di effettuare un intervento di bypass
- Perdita dell'arto dovuta a embolizzazione distale
- Blocchi renali
- Morte

### **Condizioni di fornitura**

**STERILE:** ciascun dissettore Periscope è sterilizzato con ossido di etilene (EO) e viene fornito sterile per l'uso su un solo paziente alla volta. Non riutilizzare o risterilizzare il dispositivo. La risterilizzazione può pregiudicare le funzionalità meccaniche del dispositivo e provocare lesioni al paziente.

#### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Un dissettore (1) Periscope sterile con ago cavo integrato

Un (1) foglietto con le istruzioni per l'uso

**CONSERVAZIONE:** conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

### **Ispezione**

Ispezionare attentamente la confezione sterile prima dell'apertura per verificare che non sia danneggiata o difettosa. Non usare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Se l'integrità della confezione sterile risulta compromessa oppure la confezione o il dispositivo sono difettosi, non usare il dispositivo e rivolgersi a LeMaitre Vascular per informazioni su come restituirlo.

### **Materiale consigliato**

Preparare il seguente materiale utilizzando una tecnica asettica:

- Siringa da 10cc riempita con soluzione salina sterile
- Filo guida con un diametro massimo di 0,018" e di lunghezza adeguata
- Siringa da 10cc riempita con soluzione di contrasto sterile

### **Istruzioni per l'uso**

Le tecniche per la preparazione del paziente e l'esecuzione della procedura dovranno essere determinate dal medico. Una delle possibili tecniche consigliate è la seguente:

1. Le tecniche di preparazione del paziente e la decisione se somministrare o meno terapie anticoagulanti/antiplastriniche sono a discrezione del medico.
2. Attenersi alle precauzioni e agli standard chirurgici in materia di sterilità.
3. Anestetizzare il paziente in modo appropriato, quindi accedere al sito corretto mediante arteriotomia per esporre l'ateroma.
4. Effettuare un'incisione inclinata e svasata lungo l'ateroma prossimale per creare un piano di fissaggio tra l'ateroma e l'area circostante.

*Nota: se si utilizza una tecnica fluoroscopica, seguire i passaggi descritti di seguito.*


5. Inserire il dissettore Periscope nel piano di fissaggio del vaso. Esercitare una leggera pressione sul centro dell'ateroma, quindi spingere in avanti il dispositivo verso il lato distale del segmento occluso.
6. Posizionare il dissettore Periscope all'estremità del piano da dissezionare usando l'ausilio fluoroscopico.

7. Far avanzare l'ago, quindi lavarlo con mezzo di contrasto e utilizzare la fluoroscopia per verificare che lo strato più interno sia stato correttamente inserito nel lume reale del vaso.
8. Inserire un filo guida da 0,018" nell'ago del dissettore Periscope e farlo avanzare verso la punta distale del filo fino a fissarlo saldamente al lume reale del vaso. Il fissaggio del filo guida consente di ritrarre il dissettore Periscope senza spostare il filo guida.

*Nota:*

1. *Non usare fili guida rivestiti in polimero idrofilo.*
2. *Per ottenere risultati ottimali con il filo guida, è consigliabile usare fili flessibili o muniti di punte flessibili molto lunghe.*

9. Ritrarre l'ago e rimuovere il dissettore Periscope dal paziente senza spostare il filo guida.
10. Al termine della procedura di endoartéiectomia remota, lasciare in posizione il filo guida per poter eventualmente eseguire altri interventi se richiesto.
11. Chiudere l'arteriotomia utilizzando una procedura standard.

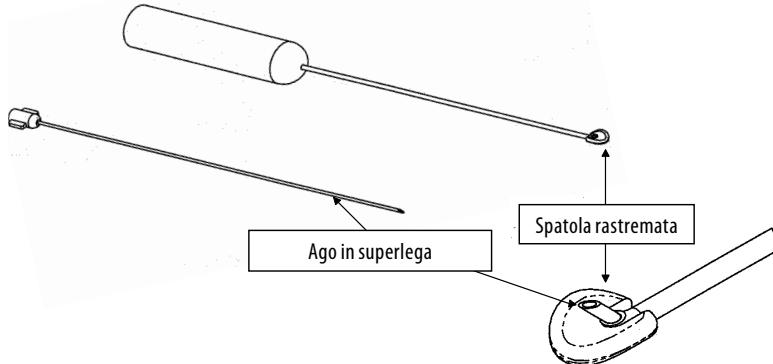

### Risterilizzazione/Riutilizzo

Il presente dispositivo è soltanto monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Non è possibile garantire la pulizia e la sterilità del dispositivo ritrattato. Il riutilizzo del dispositivo può causare contaminazione incrociata, infezione o decesso del paziente. Il ritrattamento e la risterilizzazione possono compromettere le caratteristiche prestazionali del dispositivo in quanto quest'ultimo è concepito e testato esclusivamente per un impiego monouso. La conservabilità del dispositivo dipende dal fatto che lo stesso è monouso.

### Garanzia limitata e limitazione di responsabilità

LeMaitre Vascular, Inc. garantisce che il prodotto è stato fabbricato con ragionevole cura e attenzione. Se non diversamente indicato nella presente garanzia, LEMAITRE VASCULAR (IL CUI NOME VIENE UTILIZZATO IN QUESTA SEZIONE PER RIFERIRSI A LEMAITRE VASCULAR, INC., ALLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE E AI RISPETTIVI DIPENDENTI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI E AGENTI) NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITA RELATIVAMENTE ALL'USO DEL DISPOSITIVO, IN BASE ALLE LEGGI IN VIGORE O SU ALTRE BASI (COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO), E DECLINA PERTANTO OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLE STESSE. LeMaitre Vascular non garantisce l'idoneità del dispositivo per trattamenti specifici e delega tale responsabilità all'utente stesso. La presente garanzia limitata non si applica in caso di usi errati o impropri o conservazione inadeguata del dispositivo da parte dell'acquirente o di terze parti. L'unico rimedio previsto in caso di violazione della presente garanzia limitata consisterebbe nella sostituzione o nel rimborso del prezzo di acquisto (a discrezione di LeMaitre) a condizione che il dispositivo venga restituito dall'acquirente a LeMaitre Vascular. La presente garanzia termina alla data di scadenza del dispositivo.

LEMAITRE VASCULAR NON RICONOSCE ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI LEMAITRE VASCULAR RELATIVAMENTE AL DISPOSITIVO, SIA ESSA DIRETTA, CONTRATTUALE O DERIVANTE DA ATTO ILLICITO,

NON POTRÀ SUPERARE IL VALORE DI MILLE DOLLARI (\$1.000), ANCHE NEL CASO IN CUI LEMAITRE VASCULAR FOSSE STA PREVENTIVAMENTE INFORMATA DEL RISCHIO DI TALE DANNO E INDIPENDENTEMENTE DALLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALESiasi RIMEDIO. LE PRESENTI LIMITAZIONI SI APPLICANO A OGNI RECLAMO PRESENTATO DA TERZI.

La data di revisione o emissione di queste istruzioni, riportata sull'ultima pagina delle istruzioni per l'uso, viene fornita all'utente a titolo informativo. Qualora siano trascorsi ventiquattro (24) mesi dalla data indicata e dall'uso del prodotto, è consigliabile rivolgersi a LeMaitre Vascular per verificare se sono disponibili informazioni più aggiornate sul prodotto.

## **Disector Periscope™**

(Números de modelo 4200-00, e4200-00)  
Dispositivo para endarterectomía a distancia  
Instrucciones de uso - Español

**STERILE EO**

### **Descripción del equipo**

El disector Periscope™ consta de dos componentes principales, un eje con una espátula angulada en el extremo distal y una aguja flexible hueca del mismo largo que la distancia entre el eje y la espátula. El eje y la espátula angulada están hechos de acero inoxidable, mientras que la aguja hueca está hecha con una aleación de níquel y titanio. La luz interna del eje se extiende desde el mango hasta la palma de la espátula.

El disector Periscope está disponible en un solo tamaño. La longitud útil de la espátula/eje es de aproximadamente 40 cm, mientras que la aguja hueca pueda alojar un alambre guía de hasta 0,46 mm (0,018") de diámetro.

### **Indicaciones y uso**

El disector Periscope ha sido diseñado para la extirpación intraluminal remota de vasos sanguíneos periféricos durante reconstrucciones vasculares y para proporcionar un conducto de cara a la colocación del alambre guía.

Las indicaciones generales para la reconstrucción de los vasos periféricos incluyen la cojera incapacitante, el dolor isquémico en reposo, las lesiones isquémicas cutáneas o la gangrena. Las indicaciones para la endarterectomía específicamente como procedimiento de reconstrucción vascular incluyen las lesiones localizadas y los grandes depósitos de placa circular.

### **Contraindicaciones**

- Entre las contraindicaciones se incluyen, pero no de forma exclusiva:
- Cualquier signo de cambio aneurismático o de calcificación aguda puede contraindicar la endarterectomía dado que puede esperarse una degeneración aneurismática continua de la adventicia.
- En algunos casos, las capas de la pared vascular pueden ser bastante consistentes y puede resultar difícil separar el segmento de la placa de la pared del vaso. Cuando el vaso se encuentre en este estado de la enfermedad, normalmente es recomendable abandonar la endarterectomía y evaluar la utilización de un método alternativo de reconstrucción vascular.
- El uso de este dispositivo está indicado para la arteria carótida interna, la arteria coronaria y otros vasos del sistema circulatorio central.

### **Advertencias y precauciones**

El disector Periscope sólo podrá ser usado por personal médico experimentado en procedimientos de cirugía vascular, especialmente endarterectomías. Las técnicas aquí descritas se ofrecen para los cirujanos a título orientativo.

### **Disector Periscope. Precauciones para la manipulación**

Revise siempre el envase estéril antes de utilizar el equipo. En caso de que el envase presente daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su representante de LeMaitre Vascular.

No vuelva a esterilizar el disector Periscope ni la aguja hueca.

El disector Periscope deberá utilizarse antes de la fecha de caducidad impresa en el envase.

### **Disector Periscope. Precauciones de uso**

Utilice siempre guía fluoroscópica para hacer avanzar o manipular los dispositivos endovasculares. No intente hacer avanzar a la fuerza el disector Periscope.

Compruebe que el disector Periscope esté correctamente orientado y que la punta de la aguja hueca se mantenga retraída dentro del eje mientras se hace avanzar el dispositivo hacia el vaso.

El uso del disector Periscope puede causar la perforación del vaso, lo que requeriría procedimientos intervencionistas adicionales (p. ej., revascularización de la arteria).

## **Acontecimientos adversos potenciales**

Los acontecimientos adversos potencialmente asociados al uso del disector Periscope (p. ej., todas las complicaciones asociadas a los procedimientos de ATP, endarterectomía o aterectomía) incluyen, pero no de forma exclusiva, los siguientes:

- Hematoma, hemorragia o inflamación en el lugar de la incisión/punción
- Infección de la herida (incisional)
- Lesión, disección, perforación, ruptura o seudoaneurisma del vaso
- Espasmo del vaso
- Embolia, trombosis u oclusión aguda
- Fiebre, reacciones al fármaco o reacciones alérgicas al medio de contraste
- Conversión a revascularización
- Pérdida de la extremidad debido a embolización distal
- Insuficiencia renal
- Fallecimiento

## **Cómo se suministra**

**ESTÉRIL:** Cada disector Periscope se esteriliza con óxido de etileno y se suministra estéril exclusivamente para un solo uso. No debe volver a esterilizarse ni reutilizarse. La reesterilización puede afectar negativamente al correcto funcionamiento mecánico y podría causarle lesiones al paciente.

### **CONTENIDO:**

Un (1) disector Periscope estéril con una aguja hueca integrada.

Unas (1) instrucciones de uso.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar en un lugar fresco y seco.

## **Inspección**

Inspeccione detenidamente el paquete estéril antes de abrirlo para comprobar que no presente daños ni defectos. No utilice el producto una vez transcurrida la fecha de caducidad impresa en el envase. En caso de que existan dudas sobre la integridad del envase estéril o que el envase o el producto estén dañados, no utilice el producto y póngase en contacto con LeMaitre Vascular para obtener información sobre cómo devolverlo.

## **Material recomendado**

Prepare el siguiente material usando una técnica estéril:

- Jeringa de 10 ml cargada con solución salina estéril.
- Alambre guía de hasta 0,46 mm (0,018") de diámetro y una longitud adecuada.
- Jeringa de 10 ml cargada con solución de contraste estéril.

## **Instrucciones de uso**

El médico determinará las técnicas específicas para la preparación del paciente y el procedimiento. A continuación se presenta una técnica sugerida:

1. La preparación del paciente y la administración del régimen anticoagulante / antiplaquetario quedan a la discreción del médico.
2. Aplicar las precauciones y estándares quirúrgicos estériles.
3. Bajo una anestesia adecuada, acceder a la zona correspondiente mediante una arteriotomía para exponer el ateroma.
4. Realizar una incisión inclinada, de tipo biselado, en el ateroma proximal para obtener un plano de la disección natural entre el ateroma y el medio circundante.

*Nota: Los siguientes pasos del procedimiento deberán realizarse bajo guía fluoroscópica.*


5. Introducir el disector Periscope en el plano de disección natural del vaso. Ejercer un suave movimiento de empuje alrededor del núcleo del ateroma para hacer avanzar el dispositivo hasta un punto distal al segmento ocluido.
6. Colocar el disector Periscope bajo guía fluoroscópica al final del plano de disección.

7. Mientras se hace avanzar la aguja, purgarla con medio de contraste bajo fluoroscopia para verificar la correcta penetración de la íntima hasta la verdadera luz del vaso.
8. Se puede introducir un alambre guía de 0,46 mm (0,018") en la aguja del disector Periscope y hacerlo avanzar hasta que la punta distal del alambre quede lo suficientemente anclada en la verdadera luz del vaso. El anclaje del alambre guía permitirá retraer el disector Periscope a la vez que se mantiene el alambre en su posición.

*Nota:* 1. *No se debe utilizar alambres guía hidrofílicos recubiertos de polímero.*

2. *Se obtiene un rendimiento óptimo del alambre guía usando alambres flexibles o alambres con puntas flexibles muy largas.*

9. Hacer retroceder la aguja y extraer el disector Periscope del paciente a la vez que se mantiene el alambre guía en su posición.
10. Una vez finalizado el procedimiento de endarterectomía remota, mantener el alambre guía en su posición para facilitar otros procedimientos intervencionistas que puedan ser necesarios.
11. Cerrar la arteriotomía usando un procedimiento estándar.

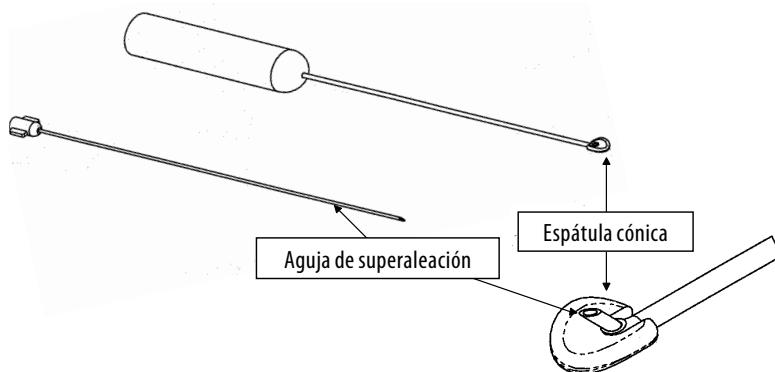

#### **Reesterilización/reutilización**

Este dispositivo es de un solo uso. No se debe volver a utilizar, procesar o esterilizar. No se puede garantizar la limpieza y esterilidad de un dispositivo reprocesado. La reutilización del dispositivo puede producir contaminación cruzada, infección o la muerte del paciente. Las características de rendimiento del dispositivo pueden verse comprometidas debido al reprocesamiento o la reesterilización, puesto que únicamente se ha diseñado y sometido a prueba para un solo uso. La vida útil del dispositivo se basa en que sea de un solo uso.

#### **Garantía limitada del producto. Límite de garantía**

LeMaitre Vascular, Inc. garantiza que este dispositivo se ha fabricado con un cuidado razonable. Salvo que se indique expresamente en el presente documento, LEMAITRE VASCULAR (TAL Y COMO SE USA EN ESTA SECCIÓN, DICHO TÉRMINO INCLUYE LEMAITRE VASCULAR, INC., SUS FILIALES Y LOS TRABAJADORES, OFICIALES, DIRECTORES, GERENTES Y AGENTES CORRESPONDIENTES) NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, CON RESPECTO A ESTE DISPOSITIVO, YA SURJA DE OFICIO O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y, EN CONSECUENCIA, RENUNCIA AL OTORGAMIENTO DE ÉSTAS. LeMaitre Vascular no se responsabiliza de la idoneidad de este dispositivo para cualquier tratamiento en concreto, de modo que la resolución será responsabilidad exclusiva del comprador. La presente garantía limitada no se aplica en la medida de cualquier tipo de maltrato o mal uso de este dispositivo por parte del comprador o una tercera parte, ni así por no conservarlo de la forma apropiada. La única acción en caso de incumplimiento de esta garantía limitada será la sustitución de este dispositivo o el reembolso del precio de éste (a la sola discreción de LeMaitre Vascular), previa devolución del dispositivo a LeMaitre Vascular por parte del comprador. La presente garantía terminará en la fecha de caducidad correspondiente a este dispositivo.

LEMAITRE VASCULAR NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENCIAL, ESPECIAL, PUNITIVO O EJEMPLAR. ASIMISMO, EN NINGÚN CASO EL CONJUNTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LEMAITRE VASCULAR CON RESPECTO A ESTE DISPOSITIVO SUPERARÁ LA CANTIDAD DE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (1.000 \$), COMO QUIERA QUE SURJA BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O SIMILAR, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LEMAITRE VASCULAR HA RECIBIDO AVISO DE DICHA PÉRDIDA, A PESAR DE LA AUSENCIA DE FIN ESENCIAL DE CUALQUIER ACCIÓN. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS.

La última página de estas Instrucciones de uso incluye una fecha de revisión o publicación para información del usuario. En caso de que hayan transcurrido veinticuatro (24) meses entre dicha fecha y el uso del producto, el usuario deberá ponerse en contacto con LeMaitre Vascular para comprobar si hay más información disponible sobre el producto.

## **Dissector Periscope™**

(Números de modelo 4200-00, e4200-00)

Dispositivo de Endarterectomia Remota

Instruções de Utilização - Português

**STERILE EO**

### **Descrição do Dispositivo**

O Dissector Periscope™ é composto por dois componentes principais, um estilete com uma espátula angular na extremidade distal e uma agulha flexível oca que acompanha todo o comprimento do estilete até à espátula. O estilete e a espátula angular são de aço inoxidável e a agulha oca é de níquel-titânio. O lúmen interno do estilete vai desde a agulha até à face interna da espátula.

O Dissector Periscope encontra-se disponível num único tamanho. O comprimento útil da espátula/estilete é de 40 cm, aproximadamente, sendo que a agulha oca pode acomodar um fio-guia com, no máximo, 0,46 mm (0,018") de diâmetro.

### **Indicações e Utilização**

O Dissector Periscope destina-se à extração intraluminal remota dos vasos sanguíneos periféricos durante a reconstrução vascular e ao fornecimento de um conduto para a colocação do fio-guia.

As indicações gerais para a reconstrução de vasos periféricos incluem uma claudicação incapacitante, dor isquémica em repouso, lesões isquémicas da pele ou gangrena. As indicações para endarterectomia, especificamente como um procedimento de reconstrução dos vasos, incluem lesões localizadas e depósitos de placa circunferencial graves.

### **Contra-indicações**

- As contra-indicações incluem, mas não se limitam a:
- Qualquer sinal de alteração aneurismática ou calcificação grave pode contra-indicar a endarterectomia, uma vez que poderá ocorrer a degeneração aneurismática contínua da adventícia.
- Em alguns casos, as camadas das paredes dos vasos podem ser bastante consistentes e poderá ser difícil separar o segmento da placa da parede do vaso. Se o vaso apresentar este estado de doença, recomenda-se que desista da endarterectomia e considere um método de reconstrução vascular alternativo.
- A utilização deste dispositivo é contra-indicada nas artérias carótidas internas e coronárias, bem como outros vasos do sistema circulatório central.

### **Avisos e Precauções**

O Dissector Periscope apenas pode ser utilizado por médicos devidamente qualificados em cirurgia vascular, especificamente em procedimentos de endarterectomia. As técnicas descritas no presente documento são fornecidas como uma orientação para o médico.

### **Dissector Periscope - Precauções de manuseamento**

Verifique sempre a embalagem esterilizada antes da utilização. Se a embalagem estiver danificada, não utilize o produto e contacte o seu representante LeMaitre Vascular local.

Não reesterilize o Dissector Periscope ou a agulha oca.

O Dissector Periscope tem de ser utilizado até à data "Utilizar até" impressa na embalagem.

### **Dissector Periscope - Precauções de utilização**

Utilize sempre a fluoroscopia ao introduzir ou manusear dispositivos endovasculares. Não tente introduzir o Dissector Periscope de forma brusca.

Certifique-se de que o Dissector Periscope está correctamente orientado e de que a ponta da agulha oca permanece recuada no estilete enquanto faz avançar o dispositivo no vaso.

A utilização do Dissector Periscope pode provocar a perfuração do vaso, obrigando a procedimentos de intervenção adicionais (por exemplo, cirurgia de bypass coronário da artéria).

## **Efeitos Adversos Possíveis**

Os efeitos adversos possivelmente associados à utilização do Dissector Periscope (por exemplo, todas as complicações associadas à PTA, procedimentos de aterectomia e endarterectomia remota) incluem, mas não se limitam aos seguintes efeitos:

- Inflamação do local de incisão/punção, hematoma ou hemorragia
- Infecção da ferida (incisão)
- Lesão vascular, dissecção, perfuração, ruptura ou pseudo-aneurisma
- Espasmo vascular
- Embolia, trombose ou oclusão aguda
- Febre, reacções a fármacos ou reacções alérgicas ao meio de contraste
- Conversão para bypass
- Perda dos membros devido a embolização distal
- Falha renal
- Morte

## **Apresentação**

**ESTERILIZADO:** Cada Dissector Periscope é esterilizado utilizando Óxido de Etileno (EO) e fornecido esterilizado para uma única utilização. Não reutilize ou reesterilize o produto.

A reesterilização pode afectar negativamente o funcionamento mecânico adequado e provocar lesões no paciente.

## **CONTEÚDO:**

Um (1) Dissector Periscope esterilizado com uma agulha oca integrada

Um (1) Instruções de utilização

**ARMAZENAMENTO:** Guarde num local fresco e seco.

## **Verificação**

Verifique cuidadosamente se a embalagem esterilizada está danificada ou se tem qualquer defeito antes de abrir a mesma. Não utilize o produto após a data "Utilizar até" indicada na embalagem. Se a integridade da embalagem esterilizada estiver comprometida ou se a embalagem ou o produto estiverem danificados, não utilize o produto e contacte a LeMaitre Vascular para obter informações de devolução.

## **Material Recomendado**

Prepare o seguinte material utilizando uma técnica esterilizada:

- Seringa de 10cc com soro fisiológico esterilizada
- Fio-guia com um máximo de 0,46 mm (0,018") de comprimento apropriado
- Seringa de 10cc com solução de contraste esterilizada

## **Instruções de Utilização**


As técnicas específicas de procedimento e preparação do paciente são determinadas pelo médico. Em seguida, é apresentada uma sugestão de técnica:

1. A preparação do paciente e a administração de medicação anti-coagulante/anti-plaquetária estão sujeitas ao critério do médico.
2. Utilize as normas e precauções cirúrgicas esterilizadas.
3. Utilizando a anestesia adequada, obtenha acesso ao local apropriado através de uma arteriotomia para expor o ateroma.
4. Efectue uma incisão oblíqua de tipo bisel no ateroma proximal para iniciar um plano de clivagem entre o ateroma e a membrana média circundante.

*Nota: Os passos seguintes devem ser efectuados sob orientação fluoroscópica.*

5. Introduza o Dissector Periscope no plano de clivagem do vaso. Exercendo uma pressão suave à volta do núcleo do ateroma, faça avançar o dispositivo até um ponto distal em relação ao segmento obstruído.
6. Sob orientação fluoroscópica, coloque o Dissector Periscope na extremidade do plano de dissecção.

7. Ao fazer avançar a agulha, irrigue a mesma com o meio de contraste sob fluoroscopia para verificar a penetração correcta da camada íntima no lúmen exacto do vaso.
  8. Introduza um fio-guia com 0,46 mm (0,018") na agulha do Dissector Periscope e faça avançar a mesma até que a ponta distal do fio esteja suficientemente fixa no lúmen do vaso exacto. A fixação do fio-guia irá permitir a retracção do Dissector Periscope, mantendo a posição do fio-guia.
- Nota:*
1. *Não utilize fios-guia hidrófilos revestidos com polímero.*
  2. *Para obter o desempenho máximo do fio-guia utilize fios flexíveis ou fios com pontas flexíveis bastante compridas.*
9. Faça recuar a agulha e retire o Dissector Periscope do paciente, mantendo a posição do fio-guia.
  10. Após a conclusão do procedimento de endarterectomia remota, mantenha a posição do fio-guia para facilitar os procedimentos de intervenção adicionais, conforme necessário.
  11. Feche a arteriotomia utilizando o procedimento padrão.

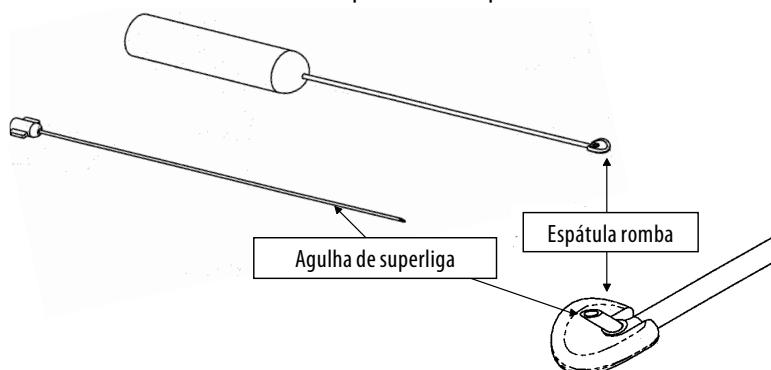

### **Reesterilização/Reutilização**

Este dispositivo destina-se a uma única utilização. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. Não é possível garantir a limpeza e esterilidade do dispositivo reprocessado. A reutilização do dispositivo pode conduzir à contaminação cruzada, infecção ou morte do paciente. As características de desempenho do dispositivo podem ficar comprometidas devido ao reprocessamento ou reesterilização, uma vez que o dispositivo foi concebido e testado exclusivamente para uma única utilização. O prazo de validade do dispositivo baseia-se numa única utilização.

### **Garantia Limitada do Produto; Limitação do Direito a Reparação**

A LeMaitre Vascular, Inc. garante que foram utilizados todos os cuidados durante o fabrico deste dispositivo. Salvo quando explicitamente indicado no presente documento, a LEMAITRE VASCULAR (CONFORME UTILIZADO NESTA SECÇÃO, ESTE TERMO DESIGNA A LEMAITRE VASCULAR, INC., RESPECTIVAS AFILIADAS E RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS, RESPONSÁVEIS DIRECTOS, DIRECTORES, GESTORES E AGENTES) NÃO FORNECE QUAISQUER GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS RELATIVAMENTE A ESTE DISPOSITIVO, DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI OU OUTRAS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM), DECLINANDO PELO PRESENTE QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS MESMAS. A LeMaitre Vascular não efectua qualquer declaração relativamente à adequação do dispositivo a qualquer tratamento específico no qual o mesmo seja utilizado, sendo esta determinação da exclusiva responsabilidade do comprador. Esta garantia limitada não se aplica em situações de utilização abusiva ou incorrecta, ou incorrecto armazenamento, deste dispositivo por parte do comprador ou de terceiros. Relativamente a qualquer violação da presente garantia, a única forma de reparação consiste na substituição, ou reembolso pelo preço de aquisição, do dispositivo (a critério exclusivo da LeMaitre Vascular) após devolução do dispositivo à LeMaitre Vascular, por parte do comprador. A presente garantia termina no final da data de validade do dispositivo.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, A LEMAITRE VASCULAR SERÁ CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA LEMAITRE VASCULAR RELATIVAMENTE A ESTE DISPOSITIVO, INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA NO ÂMBITO DE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA CONTRATUAL, EXTRA-CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJECTIVA OU OUTRA, SERÁ SUPERIOR A MIL DÓLARES (USD 1.000), INDEPENDENTEMENTE DO FACTO DA LEMAITRE VASCULAR TER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DA REFERIDA PERDA E AINDA QUE O OBJECTIVO PRINCIPAL DA REPARAÇÃO NÃO TENHA SIDO ALCANÇADO. ESTAS LIMITAÇÕES APLICAM-SE A QUAISQUER RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS.

A página de verso destas Instruções de Utilização inclui a indicação da respectiva data de revisão ou de emissão, para informação do utilizador. Caso tenham decorrido vinte e quatro (24) meses entre a data referida e a utilização do produto, o utilizador deverá contactar a LeMaitre Vascular para determinar se estão disponíveis informações adicionais sobre o produto.

## **Periscope™-dissektor**

(Modelnumre 4200-00, e4200-00)

Enhed til fjernbetjent endarterektomi

Brugervejledning – dansk

**STERILE EO**

### **Beskrivelse af enheden**

Periscope™-dissektoren består af to hovedbestanddele, et skaft med en vinklet spadel ved den distale ende og en hul, fleksibel nål, der strækker sig i skafets fulde længde til spatlen. Skaftet og den vinklede spadel er fremstillet af rustfrit stål, mens den hule nål er fremstillet af nikkel titanum. Det indre lumen i skaftet strækker sig fra håndtaget til starten på spatlen.

Periscope-dissektoren fås kun i en størrelse. Den anvendelige længde af spatlen/skaftet er ca. 40 cm, og den hule nål kan rumme en ledetråd med en diameter på op til 0,018".

### **Indikationer og anvendelse**

Periscope-dissektoren er beregnet til intraluminal stripping af perifere blodkar under karrekonstruktion og til at tilvejebringe en kanal til placering af ledetråden.

Generelle indikationer for rekonstruktion af perifert kar indbefatter invaliderende halten, iskæmisk smerte ved hvile, iskæmiske hudlæsioner eller koldbrand. Indikationer for endarterektomi, især som en procedure til karrekonstruktion, indbefatter lokaliserede læsioner og store, perifere plakaflejringer.

### **Kontraindikationer**

- Disse indbefatter, men er ikke begrænset til:
- Et hvilket som helst tegn på aneurysmal forandring eller alvorlig forkalkning kan kontraindikere endarterektomi, idet fortsat aneurysmal degeneration af adventitia kan forventes.
- I nogle tilfælde er lagene i karvæggen meget kohærente, og det kan være svært at separere plaksegmenter fra karvæggen. Ved en sådan sygdomstilstand i karret tilrådes det ofte at undgå endarterektomi og overveje en alternativ fremgangsmåde til karrekonstruktion.
- Brug af denne anordning kontraindiceres i kranspulsåren, indre halspulsåren og andre kar i det centrale kredsløb.

### **Advarsler og forholdsregler**

Periscope-dissektoren må kun anvendes af læger, der er uddannet i karkirurgi, specifikt fremgangsmåder med endarterektomi. Teknikkerne beskrevet heri gives som en vejledning til læger.

### **Periscope-dissektor - Forholdsregler ved anvendelse**

Undersøg altid den sterile emballage før brug. Hvis emballagen er beskadiget, skal du undgå at bruge produktet og kontakte din LeMaitre Vascular-repræsentant.

Resteriliser ikke Periscope-dissektoren eller den hule nål.

Periscope-dissektoren skal anvendes før den trykte holdbarhedsdato på pakken.

### **Periscope-dissektor - Forholdsregler ved anvendelse**

Brug altid fluoroskopi, når du indfører eller manipulerer endovaskulære anordninger. Brug ikke tvang ved indførelse af Periscope-dissektoren.

Kontroller, at Periscope-dissektoren har den korrekte retning, og at spidsen af den hule nål forbliver trukket tilbage i skaftet, når du indfører anordningen i karret.

Anvendelse af Periscope-dissektoren kan føre til karperforering, som kræver yderligere indgreb (f.eks. udskiftning af arterien ved bypass-kirurgi).

### **Mulige skadelige hændelser**

Mulige skadelige hændelser, der kan være forbundet med anvendelsen af Periscope-dissektoren (f.eks. alle komplikationer forbundet med PTA, endarterektomi- eller aterekomiprocedurer) indbefatter, men er ikke begrænset til, følgende:

- Inflammation ved incisions-/punkturstedet, hæmatom eller blødning
- Sårinfektion (incision)
- Karbeskadigelse, dissektion, perforering, ruptur eller pseudoaneurisme
- Karspasme
- Emboli, trombose eller akut okklusion
- Feber, reaktioner på medicin eller allergiske reaktioner på kontrastmedium
- Ændring til bypass
- Tab af lemmer på grund af distal embolisering
- Nyresvigt
- Død

### **Produktets indhold**

STERIL: Hver Periscope-dissektor er steriliseret ved brug af ethylenoxid (EO) og leveres kun til engangsbrug. Må ikke gengruges eller resteriliseres. Resterilisering kan have skadelig indvirkning på korrekt mekanisk funktion og kan resultere i skade på patienten.

### **INDHOLD:**

En (1) steril Periscope-dissektor med en integreret hul nål  
En (1) brugervejledning

OPBEVARING: Opbevares på et køligt, tørt sted.

### **Inspektion**

Undersøg den sterile pakke omhyggeligt for skader eller fejl, før den åbnes. Brug ikke produktet efter holdbarhedsdatoen på pakken. Brug ikke produktet, hvis den sterile pakke har været åbnet, eller produktet er fejlbehæftet. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din LeMaitre Vascular-repræsentant.

### **Anbefalet materiale**

Klargør følgende materiale ved brug af steril teknik:

- 10 ml sprøjte fyldt med steril saltvand
- En ledetråd op til 0,018" med passende længde
- 10 ml sprøjte fyldt med steril kontrastvæske

### **Brugervejledning**

Specifik klargøring af patienten og procedurer bestemmes af lægen. Følgende teknik foreslås:


1. Patientklargøring og administrering af regimen til antikoagulation/hæmning af thrombocyetter bestemmes af lægen.
2. Brug forholdsregler og standarder for steril kirurgi.
3. Brug korrekt anæstesi, få adgang ved korrekte sted gennem arteriotomi for at blotlægge ateromet.
4. Foretag en skrå incision i det proksimale aterom for at starte en spalteflade mellem ateromet og det omgivende medie.

*Bemærk! Følgende proceduretrin bør udføres under fluoroskopisk overvågning.*

5. Indsæt Periscope-dissektoren i karrets spalteflade. Ved brug af et forsigtigt skub omkring ateromakernen indføres anordningen til et distalt punkt for det okkluderede segment.
6. Under fluoroskopisk overvågning placeres Periscope-dissektoren ved slutningen dissektionsfladen.
7. Mens nålen indføres, skyldes nålen med kontrastmedium under fluoroskop for at bekræfte korrekt penetration af det interne lag til karrets sande lumen.
8. Indsæt en 0,018" ledetråd i nålen i Periscope-dissektoren og indfør, indtil trådens distale spids er tilstrækkeligt forankret i karrets sande lumen. Forankring af ledetråden vil muliggøre tilbagetrækning af Periscope-dissektoren, mens ledetrådens position oprettholdes.

*Bemærk! 1. Brug ikke hydrofile ledetråde betrukket med polymer.*

2. Optimal ydelse af ledetråd tilvejebringes ved anvendelse af fleksible tråde eller tråde med meget lange, fleksible spidser.
9. Træk nålen tilbage, og fjern Periscope-dissektoren fra patienten samtidig med, at ledetrådens position opretholdes.
10. Efter fuldendelse af endarterektomiproceduren opretholdes ledetrådens position for at lette yderligere indgreb, om nødvendigt.
11. Luk arteriotomi ved anvendelse af standardprocedure.

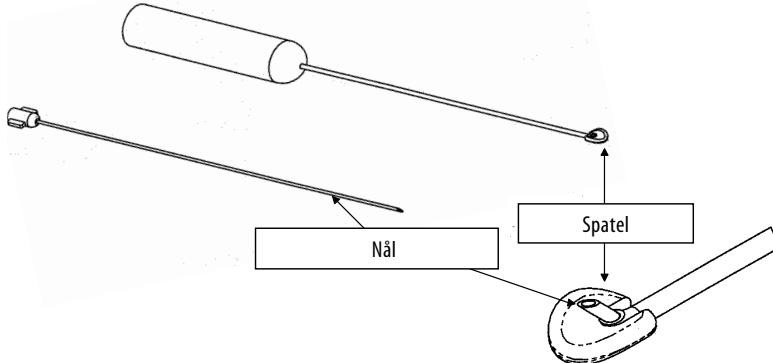

### **Restertilisering/genbrug**

Dette udstyr er kun beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Det genbehandlede udstyrs renhed og sterilitet kan ikke sikres. Genbrug af dette udstyr kan medføre krydkontaminering, infektion eller patientens død. Udstyrets egenskaber for performance kan kompromitteres pga. genbehandling eller resterilisering, fordi udstyret blev udviklet og testet til engangsbrug. Udstyrets holdbarhed er baseret på engangsbrug.

### **Begrænset produktgaranti; begrænsning af misligholdelsesbeføjelser**

LeMaitre Vascular, Inc. garanterer, at der er anvendt rimelig omhu ved fremstilling af dette udstyr. Medmindre det fremgår udtrykkeligt heri, FRALÆGGER LEMAITRE VASCULAR (SOM ANVENDT I DETTE AFSNIT INKLUDERER DENNE TERM LEMAITRE VASCULAR, INC., DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, SAMT DERES RESPEKTIVE ANSATTE, OVERORDNEDE, DIREKTØRER, LEDERE OG AGENTER) SIG HERMED ALLE UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE UDSTYR, UANSET OM DE ER OPSTÅET SOM FØLGE AF LOV ELLER PÅ ANDEN MÅDE, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL AL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL) OG FRASKRIVER SIG HERVED SAMME. LeMaitre Vascular fremsætter ingen erklæring med hensyn til egnethed til nogen bestemt behandling, hvor produktet anvendes. Dette er alene køberens ansvar. Denne begrænsede garanti gælder ikke i tilfælde af evt. misbrug eller fejlagtig anvendelse, eller forkert opbevaring af denne enhed, foretaget af køberen eller en evt. tredje part. Den eneste misligholdelsesbeføjelse vedr. denne begrænsede garanti skal være en erstatning af enheden eller en refundering af købsprisen for enheden (efter LeMaitre Vascular's eget valg) efter købers returnering af enheden til LeMaitre Vascular. Denne garanti udløber på udløbsdatoen for enheden.

LEMAITRE VASCULAR FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUEL DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADESERSTATNING, ERSTATNING FOR FØLGESKADER OG SPECIELLE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER ANDEN SKADESERSTATNING. MED HENSYN TIL DETTE UDSTYR VIL LEMAITRE VASCULARS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, UANSET HVORDAN DET OPSTÅR OG EFTER EN HVILKEN SOM HELST ANSVARSTEORI, DET VÆRE SIG VED KONTRAKT, CIVILT SØGSMÅL, SKÆRPET ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTændIGHEDER OVERSTIGE ÉTTUSINDE DOLLAR (US \$1,000), UANSET OM LEMAITRE VASCULAR ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT TAB, OG UANSET OM EN EVENTUEL AFHJÆLPENDE FORANSTALTNING IKKE HAR LEVET OP TIL SIT EGENTLIGE FORMÅ. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER FOR ALLE TREDJE PARTSKLAGER.

En revisions- eller udstedelsesdato for disse instruktioner er indeholdt på den bagerste side i brugervejledningen. Hvis der er gået fireogtyve (24) måneder mellem denne dato og produktets anvendelse, bør brugeren kontakte LeMaitre Vascular for at finde ud af, om der er kommet yderligere produktinformationer.

## **Periscope™-dissektor**

(modellnummer 4200-00, e4200-00)

Instrument för endarterektomi

Bruksanvisning – Svenska

**STERILE EO**

### **Beskrivning av instrumentet**

Periscope™-dissektorn består av två huvudkomponenter: ett skaft med en vinklad spatel distalt och en ihålig flexibel nål som går längs hela skaftet ner till spateln. Skaftet och den vinklade spateln består av rostfritt stål, medan den ihåliga nålen är gjord av nickel-titan. Skaftets inre lumen sträcker sig från handtaget till spatelns plana del.

Periscope-dissektor finns i en storlek. Spateln/skaftets arbetsdelen är ungefär 40 cm lång, och den ihåliga nålen kan inrymma en ledartråd som är upp till 0,46 mm i diameter.

### **Indikationer och användning**

Periscope-dissektor är avsedd för användning vid intraluminal stripping av perifera blodkärl vid vaskulär rekonstruktion, och för att fungera som ledare vid placering av ledartråd.

Allmänna indikationer för perifer kärlrekonstruktion omfattar invalidiserande klaudikation, ischemisk smärta vid vila, ischemiska hudlesioner eller gangrän. Indikationer för endarterektomi som en specifik procedur vid kärlrekonstruktion omfattar lokala lesioner och omfattande plackavlagringar runt kärväggarna.

### **Kontraindikationer**

- Kontraindikationer omfattar bland annat:
- Alla tecken på aneurymsmatiska förändringar eller svår förkalkning kan vara kontraindicerande för endarterektomi eftersom fortsatt aneurymsmatisk degeneration av adventitien kan förväntas.
- I vissa fall är kärväggens skikt helt integrerade och det kan vara svårt att skilja placket från kärväggen. När käret befinner sig i detta sjukdomsstadium är det oftast bäst att avstå från endarterektomi och överväga en alternativ metod för vaskulär rekonstruktion.
- Användning av denna enhet är kontraindicerad i koronarkärl, arteria carotis interna och andra kärl i det centrala cirkulationssystemet.

### **Varningar och försiktighestsåtgärder**

Periscope-dissektor får endast användas av läkare med utbildning i kärlkirugi, i synnerhet endarterektomi-ingrepp. De metoder som beskrivs här utgör endast riktlinjer för läkare.

### **Periscope®-dissektor – Försiktighestsåtgärder vid hantering**

Kontrollera alltid den sterila förpackningen före användning. Om förpackningen är skadad ska produkten inte användas. Kontakta din representant för LeMaitre Vascular.

Omsterilisera inte Periscope-dissektor eller den ihåliga nålen.

periskop-dissektor måste användas före det utgångsdatum som anges på förpackningen.

### **Periscope-dissektor – Försiktighestsåtgärder vid användning**

Använd alltid fluoroskopi vid framförande och manipulation av endovaskulära instrument. Försök inte att tvinga Periscope-dissektorn framåt.

Kontrollera att Periscope-dissektorn är korrekt inriktad och att den ihåliga nålens spets är indragen i skaftet när instrumentet förs in i käret.

Användningen av Periscope-dissektor kan leda till kärlperforation som kräver ytterligare intervention (t.ex. kirurgiskt ingrepp med bypass-graft i artären).

### **Möjliga komplikationer**

Möjliga komplikationer kopplade till användning av Periscope-dissektor (t.ex. alla komplikationer vid PTA, endarterektomi eller aterektomi-procedurer), är bland annat följande:

- Inflammation, hematom eller blödning på platsen för incision/punktion
- Sårinfektion (vid incision)
- Kärlskada, dissektion, perforation, ruptur eller pseudoaneurysm
- Kärlspasm
- Emboli, trombos eller akut ocklusion
- Feber, läkemedelsreaktion eller allergiska reaktioner mot kontrastmedel
- Övergång till bypass
- Förlust av extremitet på grund av distal emboli
- Njurinsufficiens
- Död

#### **Vid leverans**

**STERIL:** Alla Periscope-dissektorer har sterilisering med etylenoxid (EO) och levereras sterila endast för engångsbruk. Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Omsterilisering kan ha negativa effekter på den mekaniska funktionen och kan leda till skada på patienten.

#### **INNEHÅLL:**

En (1) steril Periscope-dissektor med integrerad, ihålig nål  
En (1) bruksanvisning

**FÖRVARING:** Förvara på en sval och torr plats.

#### **Inspektion**

Kontrollera noggrant att den sterila förpackningen inte har skador eller defekter innan den öppnas. Använd inte produkten efter "Bäst före"-datumet på förpackningen. Om den sterila förpackningen förefaller skadad eller om förpackningen eller produkten är defekt ska produkten inte användas. Kontakta din återförsäljare för LeMaitre Vascular för returinformation.

#### **Rekommenderat material**

Förbered följande material med steril teknik:

- 10 cc-spruta fyllt med steril koksaltlösning
- Upp till 0,46 mm ledartråd av lämplig längd
- 10 cc-spruta fyllt med steril kontrastvätska

#### **Bruksanvisning**

Specifika patientförberedelser och tekniker bestäms av läkaren. Följande teknik är ett förslag:

1. Patientförberedelse och administrering av antikoagulantia/ blodförtunnande medel bestäms av till läkaren.
2. Använd sterila, kirurgiska försiktighetsåtgärder och rutiner.
3. Under lämplig anestesi, bered tillträde på lämpligt ställe genom en arteriotomi för att frilägga ateromet.
4. Gör en snett lutande incision proximalt i ateromet för att påbörja ett delningsplan mellan aterom och omgivande vävnad.


*OBS: Följande steg bör utföras under ledning med fluoroskop.*

5. För in Periscope-dissektor i kärllets delningsplan. För med ett lätt tryck fram instrumentet runt ateromet, och en bit distalt om det ockluderade segmentet.
6. Placera under ledning med fluoroskop Periscope-dissektorn i slutet av dissektionsplanet.
7. Spola nålen med kontrastmedel under fluoroskop för att kontrollera att nålen ligger i äkta lumen.
8. För in en 0,46 mm ledartråd i Periscope-dissektorns nål tills den distala spetsen på tråden är tillräckligt förankrad i kärllets äkta lumen. När ledartråden är förankrad kan Periscope-dissektorn dras tillbaka med ledartråden fortfarande på plats.

*OBS: 1. Använd inte polymeröverdragna, hydrofila ledartrådar.*

2. Optimal ledartrådfunktion uppnås vid användning av flexibla trådar eller trådar med mycket långa böjliga spetsar.

9. Dra tillbaka nålen och avlägsna Periscope-dissektorn från patienten med ledarträden fortfarande på plats.
10. När endarterektomin är avslutad ska ledarträden vara kvar i position för att underlätta andra interventioner som kan komma att behövas.
11. Slut arteriotomin enligt normala rutiner.

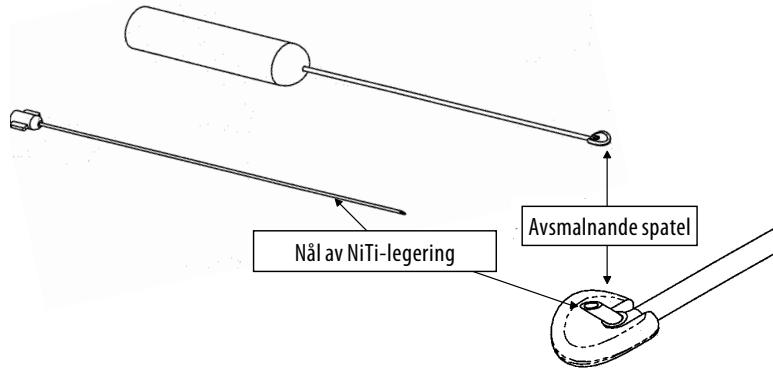

### **Omsterilisering/återanvändning**

Den här enheten är endast avsedd för engångsbruk. Får inte återanvändas, omarbetas eller omsteriliseras. Renlighet eller sterilitet för omarbetad enhet kan inte garanteras. Återanvändning av enheten kan leda till korskontaminering, infektion eller patientdödsfall. Enhetens prestandaeganskaper kan försämrmas på grund av omarbetning eller omsterilisering eftersom den enbart har utformats och testats för engångsbruk. Enhetens livslängd är enbart baserad på engångsbruk.

### **Begränsad produktgaranti; Begränsning av ersättning**

LeMaitre Vascular, Inc. garanterar att skälig varsamhet har vidtagits vid tillverkningen av denna enhet. Förutom det som uttryckligen anges här GER LEMAITRE VASCULAR (I DETTA AVSNITT OMFATTAR DETTA BEGREPP LEMAITRE VASCULAR, INC., DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, STYRELSEMEDLEMMAR, DIREKTÖRER OCH REPRESENTANTER) INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER DENNA ENHET, VARE SIG I KRAFT AV LAG ELLER AV ANDRA SKÄL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄAMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT ÄNDAMÅL) OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN DESSA. LeMaitre Vascular gör inga utfästelser angående lämplighet för någon speciell behandling där denna enhet används, utan ansvaret för detta beslut vilar helt och hållt på köparen. Den begränsade garantin gäller inte vid fall av missbruk eller felaktig användning eller underlätenhet att förvara denna enhet korrekt, av köparen eller tredje part. Den enda ersättningen för brott mot denna begränsade garanti skall vara utbyte av, eller återbetalning av inköpspriset för denna enhet (enligt LeMaitre Vascalars gottfinnande) sedan köparen har returnerat enheten till LeMaitre Vascular. Denna garanti upphör att gälla vid denna enhets utgångsdatum.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN LEMAITRE VASCULAR HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON SOM HELST DIREKT, INDIREKT ELLER SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJD-, STRAFF- ELLER OLYCKSSKADA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN LEMAITRE VASCULARS SAMMANLAGDA SKADESTÄNDSSKYLDIGHET AVSEENDE DENNA ENHET, OAVSETT HUR DEN UPPKOMMER, ENLIGT NÅGON SOM HELST TEORI OM ANSVAR, VARE SIG DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, UTOМОBLIGATORISKT ANSVAR ELLER ABSOLUT ANSVAR ELLER ANNAT, ÖVERSTIGA ETTUSEN US-DOLLAR (US\$ 1000), OAVSETT OM LEMAITRE VASCULAR HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST OCH OBEROENDE AV OM ERSÄTTNINGEN UPPFYLLER SITT AVSEDDA SYFTE. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER FÖR ALLA ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART.

Revisions- eller utgivningsdatumet för dessa anvisningar anges på sista sidan i denna bruksanvisning som information till användaren. Om tjugo fyra (24) månader har gått mellan detta datum och det datum denna produkt används bör användaren kontakta LeMaitre Vascular för att undersöka om ytterligare information om produkten finns.

## **Periscope™-dissector**

(Modelnummers 4200-00, e4200-00)

Hulpmiddel voor remote endarteriectomie

Gebruiksaanwijzing - Nederlands

**STERILE EO**

### **Beschrijving van het hulpmiddel**

De Periscope™-dissector bestaat uit twee hoofdonderdelen: een schacht met een gebogen spatel aan het distale uiteinde en een holle, flexibele naald die over de volledige lengte van de schacht naar de spatel loopt. De schacht en de gebogen spatel zijn gemaakt van roestvrij staal terwijl de holle naald gemaakt is van nikkeltitium. Het binnenste lumen van de schacht strekt zich uit van de handgreep tot het middelste van de spatel.

De Periscope-dissector is verkrijgbaar in één maat. De bruikbare lengte van de spatel/schacht is ongeveer 40 cm en de holle naald is geschikt voor een voerdraad met een diameter van maximaal 0.018 inch (0,46 mm).

### **Indicaties en gebruik**

De Periscope-dissector is bestemd voor het intraluminaal stripen van perifere bloedvaten van afstand tijdens een vaatreconstructie en voor het creëren van een lumen voor de plaatsing van een voerdraad.

Algemene indicaties voor perifere vaatreconstructie zijn onder meer claudicatio intermittens, ischemische pijn in rust, ischemisch huidletsel en gangreen. Indicaties voor endarteriectomie in het bijzonder als procedure voor vaatreconstructie zijn onder meer plaatselijk letsel en ernstige circumferentiële plaqueafzettingen.

### **Contra-indicaties**

- Contra-indicaties zijn onder meer:
- Teken van aneurysmatische verandering of ernstige verkalking kunnen een contra-indicatie voor endarteriectomie vormen, omdat continue aneurysmadegeneratie van de adventitia te verwachten valt.
- In sommige gevallen kunnen de lagen van de vaatwand sterk verkleefd zijn en kan het lastig zijn de plaquesegmenten van de vaatwand te scheiden. Als het vat zich in een dergelijke staat bevindt, is het meestal aan te raden geen endarteriectomie uit te voeren en een ander vaatreconstructietechniek te overwegen.
- Er geldt een contra-indicatie voor het gebruik van dit hulpmiddel in de kransslagaderen, carotides internae en andere vaten van de centrale bloedsomloop.

### **Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

De Periscope-dissector mag uitsluitend worden gebruikt door artsen die zijn opgeleid in vaatchirurgie, in het bijzonder in endarteriectomieprocedures. De technieken die hier worden beschreven zijn bedoeld als richtlijn voor clinici.

### **Periscope-dissector - Voorzorgsmaatregelen bij gebruik**

De steriele verpakking altijd vóór gebruik inspecteren. Als de verpakking beschadigd is, mag het product niet gebruikt worden en moet u contact opnemen met uw LeMaitre Vascular-vertegenwoordiger.

De Periscope-dissector en de holle naald niet opnieuw steriliseren.

De Periscope-dissector moet worden gebruikt vóór de uiterste gebruiksdatum die is afgedrukt op de verpakking.

### **Periscope-dissector - Voorzorgsmaatregelen bij gebruik**

Gebruik altijd röntgendoorlichting bij het opvoeren of manipuleren van endovasculaire hulpmiddelen. Oefen geen overmatige kracht uit bij het opvoeren van de Periscope-dissector.

Controleer of de Periscope-dissector juist geplaatst is en of de punt van de holle naald in de schacht teruggetrokken blijft terwijl het hulpmiddel wordt opgevoerd in het vat.

Het gebruik van de Periscope-dissector kan leiden tot vaatperforatie waardoor aanvullende chirurgische ingrepen vereist zijn (bijv. bypassgraftchirurgie van de slagader).

## **Mogelijke bijwerkingen**

Bijwerkingen die mogelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van de Periscope-dissector (d.w.z. alle complicaties gerelateerd aan PTA en aan procedures voor endarteriectomie of atherectomy op afstand) zijn onder meer:

- Ontsteking, hematoom of bloeding op de plaats van de incisie/punctie
- Wondinfectie (als gevolg van de incisie)
- Vaatletsel, -dissectie, -perforatie, -ruptuur of pseudoaneurysma
- Vaatspasme
- Embolie, trombose of acute occlusie
- Koorts, reacties op geneesmiddel of allergische reacties op contrastmiddel
- Overstap naar bypass
- Verlies van ledemaat als gevolg van distale embolisatie
- Nierfalen
- Overlijden

## **Leveringsvorm**

**STERIEL:** Elke Periscope-dissector wordt gesteriliseerd met ethyleenoxide (EtO) en wordt steriel geleverd, uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken of opnieuw steriliseren. Hersterilisatie kan de mechanische werking negatief beïnvloeden en kan leiden tot letsel aan de patiënt.

### **INHOUD:**

Eén (1) steriele Periscope-dissector met geïntegreerde holle naald

Eén (1) gebruiksaanwijzing

**OPSLAG:** Bewaar het product op een koele, droge plaats.

## **Inspectie**

Inspecteer de steriele verpakking vóór het openen zorgvuldig op beschadiging en defecten. Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking. Als de integriteit van de steriele verpakking geschonden is of als de verpakking of het product defect is, mag het product niet gebruikt worden en moet u contact opnemen met LeMaitre Vascular voor retourinformatie.

## **Aanbevolen materiaal**

Bereid de volgende materialen voor met een steriele techniek:

- 10 ml-spuit gevuld met steriele zoutoplossing
- Voerdraad van maximaal 0.018 inch (0,46 mm) met de juiste lengte
- 10 ml-spuit gevuld met een steriel contrastmiddel

## **Gebruiksinstucties**

Specifieke technieken voor de voorbereiding van de patiënt en de ingreep worden bepaald door de arts. Onze voorgestelde techniek is als volgt:

1. De voorbereiding van de patiënt en de toediening van anticoagulatie-/antibloedplaatjesterapie worden overgelaten aan het oordeel van de arts.
2. Gebruik steriele chirurgische voorzorgsmaatregelen en protocols.
3. Gebruik geschikte anesthesie en leg met een arteriotomie de juiste locatie open voor toegang tot het atheroom.
4. Maak een zijdelingse, schuine incisie in het proximale atheroom als uitgangspunt voor een kliefvlak tussen het atheroom en de omliggende weefsels.

**Opmerking:** *De volgende stappen van de ingreep moeten uitgevoerd worden onder röntgendoorlichting.*


5. Breng de Periscope-dissector in het kliefvlak van het vat in. Maak een zachte duwbeweging rond de kern van het atheroom en voer het hulpmiddel op tot een locatie distaal van het geocludeerde segment.
6. Plaats de Periscope-dissector onder röntgendoorlichting aan het uiteinde van het dissectievlek.
7. Terwijl u de naald opvoert, spoelt u deze onder röntgendoorlichting door met contrastmiddel om de penetratie van de intimalaag in het ware lumen van het vat te controleren.

- Breng een voerdraad van 0.018 inch (0,46 mm) in de naald van de Periscope-dissector in en voer deze op tot de distale tip van de draad voldoende verankerd zit in het ware vaatlumen. Door de verankering van de voerdraad kan de Schubert Periscope-dissector teruggetrokken worden terwijl de voerdraad op zijn plaats blijft.

*Opmerking: 1. Gebruik geen hydrofiele voerdraden met polymeercoating.*

*2. U verkrijgt het beste resultaat bij gebruik van flexibele draden of draden met zeer lange flexibele tips.*

- Trek de naald terug en verwijder de Periscope-dissector uit de patiënt terwijl de voerdraad op zijn plaats blijft.
- Na voltooiing van de remote endarteriectomieprocedure houdt u de voerdraad op zijn plaats voor eventuele aanvullende chirurgische ingrepen.
- Sluit de arteriotomie volgens standaardprotocol.

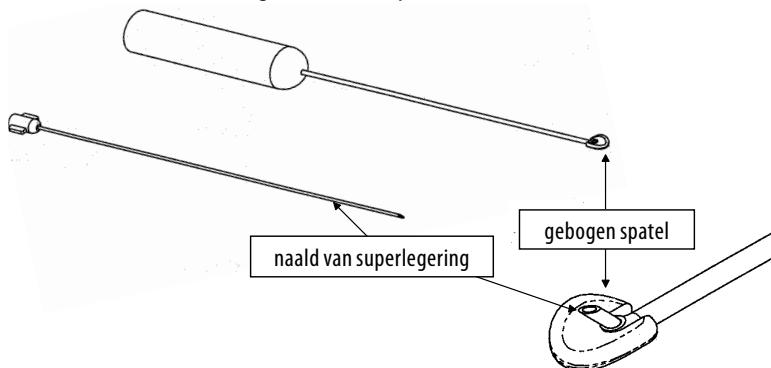

#### **Hersterilisatie/hergebruik**

Dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken, recyclen of opnieuw steriliseren. Het kan niet worden gegarandeerd dat een gerecycled hulpmiddel schoon en steriel is. Het hergebruiken van het hulpmiddel kan leiden tot kruiscontaminatie, infectie of overlijden van de patiënt. De werking van het hulpmiddel kan door recycling of hersterilisatie afnemen, aangezien het hulpmiddel uitsluitend is ontworpen en getest voor eenmalig gebruik. De houdbaarheidsduur van het hulpmiddel is uitsluitend gebaseerd op eenmalig gebruik.

#### **Beperkte productgarantie; beperking van rechtsmiddelen**

LeMaitre Vascular, Inc. garandeert dat dit instrument met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders is vermeld, VERLEENT LEMAITRE VASCULAR (BIJ GEBRUIK IN DEZE PARAGRAAF OMVAT DEZE NAAM LEMAITRE VASCULAR, INC., AAN DIT BEDRIJF VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN DE BIJ OF VOOR DEZE ONDERNEMINGEN WERKZAME WERKNEMERS, LEIDINGGEVENDEN, DIRECTEUREN, MANAGERS EN AGENTEN) GEEN EXPLICiete OF IMPLICiete GARANTIE MET BETrekking tot dit HULPMIDDEL, ONGEACHT OF EVENTUELE AANSPRAKEN WETTELijk OF ANDERSZINS ZIJN GEFUNDEERD. DAARONDER ZIJN, ZONDER BEPERKING, BEGREPEN IMPLICiete GARANTIES MET BETrekking tot VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ZULKE AANSPRAKEN WORDEN HIERMEE DAN OOK AFGEWEZEN. LeMaitre Vascular aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid voor enigerlei specifieke behandeling waarvoor dit hulpmiddel wordt gebruikt. Het bepalen daarvan is exclusief de verantwoordelijkheid van de koper. Deze beperkte garantie heeft geen betrekking op eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van dit hulpmiddel, of op nalatigheid in de wijze van bewaring van het hulpmiddel, door de koper of een derde. De enige aanspraken in geval van inbreuk op deze beperkte garantie bestaan uit vervanging van het hulpmiddel of vergoeding van de aanschafprijs (volledig naar keuze van LeMaitre Vascular) na retournering van het hulpmiddel door de koper aan LeMaitre Vascular. Deze garantie vervalt op de uiterste gebruiksdatum van dit hulpmiddel.

LEMAITRE VASCULAR IS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELijk VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, STRAFRECHTELijke OF SMARTENGELDRECHTELijke CONSEQUENTIES VAN ENIGERLEI AARD. ONDER GEEN BEDING ZAL DE TOTALE AANSPRAKELijkHEID VAN LEMAITRE VASCULAR MET BETrekking tot dit HULPMIDDEL, ONGEACHT HOE EN KRACHTENS

WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEINSSEL EVENTUELE AANSPRAKEN ZIJN  
GEFUNDEERD, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD,  
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, DE WAARDE VAN EENDUIZEND  
AMERIKAANSE DOLLAR (\$1000) OVERSTIJGEN, ONGEACHT OF LEMAITRE VASCULAR  
VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN OF VERLIEZEN OP DE HOOGTE  
IS GESTELD EN NIETTEGENSTAANDE HET ONTBREKEN VAN HET WEZENLIJKE DOEL  
VAN ENIG RECHTSMIDDEL. DEZE BEPERKENDE BEPALINGEN HEBBEN TEVENS  
BETREKKING OP ALLE AANSPRAKEN VAN DERDEN.

Ter kennisneming door de gebruiker is op de achterpagina van deze  
gebruiksaanwijzing de datum van uitgave of herziening van deze  
gebruiksaanwijzing vermeld. Indien tussen deze datum en de datum van  
ingebruikneming van het product meer dan vierentwintig (24) maanden zijn  
verstreken, moet de gebruiker bij LeMaitre Vascular navragen of er inmiddels  
nieuwe informatie over het product voorhanden is.

## **Periscope™ Dissector**

(Αριθμοί μοντέλου 4200-00, e4200-00)

Συσκευή ενδαρτηρεκτομής εξ αποστάσεως

Οδηγίες χρήσης - Ελληνικά

**STERILE EO**

### **Περιγραφή της συσκευής**

Η συσκευή ανατομής Periscope™ Dissector αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία, ένα στέλεχος με σπάτουλα υπό γωνία στο άπω άκρο και μια κοιλη εύκαμπτη βελόνη η οποία διατρέχει ολόκληρο το μήκος του στελέχους μέχρι τη σπάτουλα. Το στέλεχος και η σπάτουλα υπό γωνία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ η κοιλη βελόνη είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο νικελίου. Ο εσωτερικός αυλός του στελέχους εκτείνεται από τη λαβή μέχρι την παλάμη της σπάτουλας.

To Periscope Dissector είναι διαθέσιμο σε ένα μέγεθος. Το ωφέλιμο μήκος της σπάτουλας/στελέχους είναι περίπου 40 cm και η κοιλη βελόνη μπορεί να δεχθεί σύρμα οδήγησης διαμέτρου μέχρι 0,018".

### **Ενδείξεις και χρήση**

Το Periscope Dissector προορίζεται για την ενδοαυλική απόξεση εξ αποστάσεως περιφερικών αιμοφόρων αγγείων κατά τη διάρκεια αγγειακή αναδόμησης και για την παροχή αγωγού για την τοποθέτηση του σύρματος οδήγησης.

Οι γενικές ενδείξεις για περιφερική αγγειακή αναδόμηση περιλαμβάνουν χωλότητα που οδηγεί σε αναπτρία, ισχαιμικό πόνο κατά την ανάπαιση, ισχαιμικές δερματικές βλάβες ή γάγγρανα. Οι ενδείξεις για ενδαρτηρεκτομή ειδικά ως διαδικασία για αναδόμηση αγγείων συμπεριλαμβάνουν εντοπισμένες βλάβες και σημαντικές εναποθέσεις πλάκας στην περιφέρεια.

### **Αντενδείξεις**

- Οι αντενδείξεις συμπεριλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται στα εξής:
- Οποιαδήποτε σημεία ανευρυσματικής μεταβολής ή σοβαρής αποτιτάνωσης μπορεί να αποτελούν αντενδείξεις για ενδαρτηρεκτομή, εφόσον μπορεί να αναμένεται συνεχής ανευρυσματική εκφύλιση του εξωτερικού χιτώνα.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στιβάδες του τοιχώματος του αγγείου μπορεί να είναι αρκετά συνεκτικές και το τμήμα της πλάκας να είναι δύσκολο να αποχωριστεί από το τοίχωμα του αγγείου. Όταν το αγγείο βρίσκεται σε αυτήν την παθολογική κατάσταση, συνιστάται συχνά να εγκαταλείπεται η ενδαρτηρεκτομή και να εξετάζεται εναλλακτική μέθοδος αγγειακής ανακατασκευής.
- Η χρήση αυτής της συσκευής αντενδείκνυται στις στεφανιαίες, έσω καρωτιδικές αρτηρίες, και άλλα αγγεία του κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος.

### **Προειδοποίησης και προφυλάξεις**

Το Periscope Dissector μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς εκπαιδευμένους στην αγγειοχειρουργική, ειδικά σε διαδικασίες ενδαρτηρεκτομής. Οι τεχνικές που περιγράφονται εδώ παρέχονται στους κλινικούς χρήστες ως οδηγός.

### **Periscope Dissector - Προφυλάξεις μεταχείρισης**

Πάντοτε να επιθεωρείτε την αποστειρωμένη συσκευασία πριν τη χρήση. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της LeMaitre Vascular.

Μην επαναποτειρώνετε το Periscope Dissector ή την κοιλη βελόνη.

To Periscope Dissector πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της ημερομηνίας λήξης ("Use By") που αναγράφεται στη συσκευασία.

### **Periscope Dissector - Προφυλάξεις χρήσης**

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε ακτινοσκόπηση κατά την προώθηση ή το χειρισμό ενδοαγγειακών συσκευών. Μην επιχειρήσετε να προωθήσετε με δύναμη το Periscope Dissector.

Επιβεβαιώστε ότι το Periscope Dissector είναι σωστά προσανατολισμένο και το άκρο της κοιλης βελόνης παραμένει ανασυρμένο εντός του στελέχους κατά την προώθηση της συσκευής, μέσα στο αγγείο.

Η χρήση του Periscope Dissector μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση του αγγείου, η οποία απαιτεί επιπρόσθετες επεμβατικές διαδικασίες (π.χ. χειρουργική επέμβαση μοσχεύματος παράκαμψης (bypass) της αρτηρίας).

## **Ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες**

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του Periscope Dissector (δηλ. όλες οι επιπλοκές που σχετίζονται με διαδικασίες διαδερμικής διαυλικής αγγειοπλαστικής (PTA), ενδραφτηρεκτομής εξ αποστάσεως ή αθηρεκτομής) συμπεριλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται στα εξής:

- Φλεγμονή στο σημείο της εντομής/διάτρησης, αιμάτωμα ή αιμορραγία
- Μόλυνση του τραύματος (εντομής)
- Τραυματισμός, ανατομή, διάτρηση, ρήξη ή ψευδοανεύρυσμα αγγείου
- Σπασμός αγγείου
- Έμβολα, θρόμβωση ή οξεία έμφραξη
- Πυρετός, αντιδράσεις σε φάρμακα ή αλλεργικές αντιδράσεις στο σκιαγραφικό μέσο
- Μετατροπή σε παράκαμψη (bypass)
- Απώλεια μέλους λόγω άπω εμβολισμού
- Νεφρική ανεπάρκεια
- Θάνατος

## **Πώς παρέχεται**

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ:** Κάθε συσκευή Periscope Dissector είναι αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο (EO) και παρέχεται αποστειρωμένη για μία χρήση μόνο. Μην την επαναχρησιμοποιείτε ή την επαναποστειρώνετε. Η επαναποστειρώση μπορεί να επηρέασει αρνητικά τη ωστή μηχανική λειτουργία και θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενή.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:**

Μία (1) στείρα συσκευή Periscope Dissector με ενσωματωμένη κοίλη βελόνη  
Ένα εγχειρίδιο (1) οδηγιών χρήσης

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.

## **Επιθεώρηση**

Επιθεωρήστε προσεκτικά την αποστειρωμένη συσκευασία για τυχόν ζημιές ή ελαττώματα πριν το άνοιγμα. Μη χρησιμοποιήστε το προϊόν εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ("Use By") που αναγράφεται στη συσκευασία. Εάν η ακεραιότητα της αποστειρωμένης συσκευασίας είναι μειωμένη, ή η συσκευασία ή το προϊόν παρουσιάζουν ελαττώματα, μη χρησιμοποιήστε το προϊόν και επικοινωνήστε με την LeMaitre Vascular για πληροφορίες επιστροφής.

## **Συνιστώμενο υλικό**

Προετοιμάστε το ακόλουθο υλικό χρησιμοποιώντας στείρα τεχνική:

- Σύριγγα 10 cc γεμάτη με φυσιολογικό ορό
- Σύρμα οδήγησης μέχρι 0,018" κατάλληλου μήκους
- Σύριγγα 10 cc γεμάτη με στείρο διάλυμα σκιαγραφικού μέσου

## **Οδηγίες χρήσης**


Οι ειδική προετοιμασία του ασθενή και οι τεχνικές της διαδικασίας καθορίζονται από τον ιατρό. Μία προτεινόμενη τεχνική είναι η εξής:

1. Η προετοιμασία του ασθενή και η χορήγηση αντιπηκτικής/αντιαιμοπεταλιακής αγωγής εναπόκεινται στην κρίση του ιατρού.
2. Χρησιμοποιήστε στείρες χειρουργικές προφυλάξεις και πρότυπα.
3. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αναισθησία, προσπελάστε το κατάλληλο σημείο μέσω αρτηριοτομίας για να αποκαλύψετε το αθήρωμα.
4. Διενεργήστε κεκλιμένη εντομή τύπου λοξοτόμησης του εγγύς αθηρώματος για να ξεκινήσετε ένα επίπεδο απόσχισης μεταξύ του αθηρώματος και των γύρω μέσων.

**Υπόδειξη:** *Τα ακόλουθα βήματα διαδικασίας πρέπει να διενεργούνται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση.*

5. Εισάγετε το Periscope Dissector στο επίπεδο απόσχισης του αγγείου.  
Χρησιμοποιώντας μια απαλή κίνηση ώθησης γύρω από τον πυρήνα του αθηρώματος, προωθήστε τη συσκευή σε ένα σημείο άπω του φραγμένου τμήματος.
6. Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, τοποθετήστε το Periscope Dissector στο τέλος του επιπέδου ανατομής.

7. Ενώ προωθείτε τη βελόνη, εκπλύνετε τη βελόνη με σκιαγραφικό μέσο υπό ακτινοσκόπηση για να επαλθεύσετε τη σωστή διείσδυση της εσώτατης στιβάδας μέσα στον πραγματικό αυλό του αγγείου.
  8. Εισάγετε ένα σύρμα οδήγησης 0,018" στη βελόνη του Periscope Dissector και προωθήστε μέχρι το άπω άκρο του σύρματος να αγκυροβοληθεί επαρκώς μέσα στον πραγματικό αυλό του αγγείου. Η αγκύρωση του σύρματος οδήγησης θα επιτρέψει την ανάσυρση του Periscope Dissector ενώ διατηρείται η θέση του σύρματος οδήγησης.
- Υπόδειξη:**
1. Μη χρησιμοποιείτε υδρόφιλα σύρματα οδήγησης καλυμμένα με πολυμερές.
  2. Η βέλτιστη απόδοση του σύρματος οδήγησης επιτυγχάνεται με τη χρήση εύκαμπτων συρμάτων ή συρμάτων με πολύ μακριά εύκαμπτα άκρα.
9. Ανασύρετε τη βελόνη και αφαιρέστε το Periscope Dissector από τον ασθενή ενώ διατηρείτε τη θέση του σύρματος οδήγησης.
  10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδαρτηρεκτομής από απόσταση, διατηρήστε τη θέση του σύρματος οδήγησης για να διευκολύνετε τις επιπρόσθετες επεμβατικές διαδικασίες, ανάλογα με την περίπτωση.
  11. Κλείστε την αρτηριοτομία χρησιμοποιώντας τυπική διαδικασία.

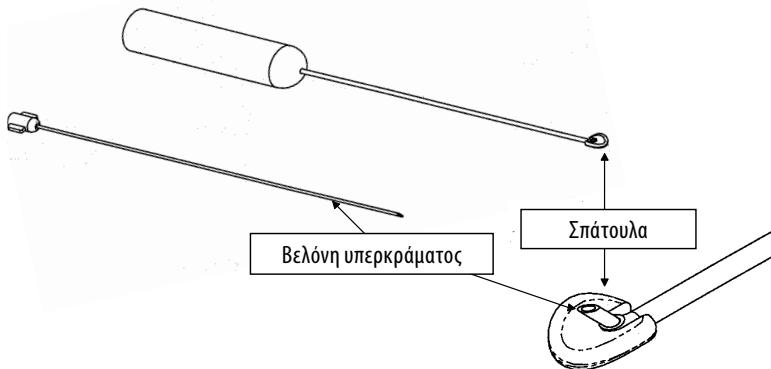

#### Επαναποστείρωση/Επαναλαμβανόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάζεστε ή επαναποστειρώνετε. Η καθαριότητα και η στειρότητα της επανεπεξεργασμένης συσκευής δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Η επαναχρησιμοποίηση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση μολύνσεων μεταξύ ασθενών, λοιμωξη, ή θάνατο του ασθενούς. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά λόγω της επανεπεξεργασίας ή επαναποστείρωσης, δεδομένου ότι η συσκευή σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε μόνο για μία χρήση. Η διάρκεια ζωής της συσκευής βασίζεται σε μία χρήση μόνο.

#### Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος, περιορισμός μέτρων αποκατάστασης

Η LeMaitre Vascular, Inc. εγγυάται ότι έχει διθεί η ειλογη φροντίδα κατά την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν, η LEMAITRE VASCULAR (ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ LEMAITRE VASCULAR, INC., ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ) ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΣΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΆΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ) ΚΑΙ ΜΕΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η LeMaitre Vascular δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα για οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή, ο οποίος προσδιορισμός αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται στο βαθμό οποιαδήποτε κακομεταχείρισης ή κακής χρήσης, ή μη σωστής φύλαξης αυτής της συσκευής από τον αγοραστή ή οποιονδήποτε τρίτο. Η μόνη αποκατάσταση για παράβαση αυτής της περιορισμένης εγγύησης θα είναι η αντικατάσταση ή η επιστροφή της τιμής αγοράς για τη συγκεκριμένη συσκευή (κατ' επιλογή της LeMaitre Vascular μόνο) μετά από επιστροφή της συσκευής στην LeMaitre Vascular. Αυτή η εγγύηση θα τερματιστεί κατά την ημερομηνία λήξης της συσκευής.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η LEMAITRE VASCULAR ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ LEMAITRE VASCULAR ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (1.000\$ Η.Π.Α.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η LEMAITRE VASCULAR ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Μια ημερομηνία αναθεώρησης ή έκδοσης αυτών των οδηγιών περιλαμβάνεται στην πίσω σελίδα αυτών των Οδηγιών Χρήσης για την πληροφόρηση του χρήστη. Εάν έχουν παρέλθει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μεταξύ αυτής της ημερομηνίας και της χρήσης του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την LeMaitre Vascular για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

## Symbol Legend

	Distributed By:	<b>Rx only</b>		 <a href="https://efu.lemaitre.com">efu.lemaitre.com</a>	<b>STERILE   EO</b>
English	Symbol Legend	Distributed By	Caution: U.S. Federal and other law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Do Not Use if Package is Opened or Damaged	Esterilizado usando óxido de etileno
Deutsch	Symbollegende	Vertrieb durch	Achtung: Gemäß den Bundesgesetzen der USA und anderen Gesetzen darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes verkauft werden.	Nicht verwenden, wenn Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.	Sterilisiert med ethylenoxid
Français	Légende des symboles	Distribué par	Attention : La législation fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif qu'aux seuls médecins ou sur ordre d'un médecin.	N'utilisez pas l'appareil si son emballage est ouvert ou abîmé	Sterilisé/serad med etylenoxid
Italiano	Descrizione dei simboli	Distributore	Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti e altre leggi consentono la vendita di questo dispositivo solo a medici dietro prescrizione medica.	Non usare il dispositivo se la confezione è aperta o danneggiata.	Istruzioni per l'uso: <a href="https://efu.lemaitre.com">https://efu.lemaitre.com</a>
Español	Leyenda de símbolos	Distribuido por	Precavución: La legislación federal de EE.UU. y otras regulaciones restringen la venta de este dispositivo a la prescripción médica.	No utilizar si el envase está abierto o dañado.	Antostepouleto με τη χρήση αιθυλένοξενίου

	Distributed By:	Rx only	 <small>ειδη στοιχεία</small>	 <small>ειδη στοιχεία</small>	STERILE EO
Português	Legenda de símbolos	Distribuído por Cuidado: Segundo a lei federal dos E.U.A. e outras leis, este dispositivo só pode ser vendido por ou por ordem de um médico.	Não utilize o dispositivo, se a embalagem estiver aberta ou danificada	Consultar instruções de utilização. <a href="https://eifu.lemaitre.com">https://eifu.lemaitre.com</a>	Sterilized with ethylene oxide
Dansk	Symbolforklaring	Distribueret af Advarsel: Følgge forbundssatslovgivning og anden lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter dennes anvisning.	Må ikke bruges, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget.	Se brugervejledningen: <a href="https://eifu.lemaitre.com">https://eifu.lemaitre.com</a>	Mit Ethylenoxidgas sterilisiert
Svenska	Symbolförklaring	Distribueras av Förskickethet: Enligt amerikansk, federal lagstiftning och andra lagar får dena enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.	Använd inte instrumentet om förpackningen är öppnad eller skadad	Se Bruksaanvisning: <a href="https://eifu.lemaitre.com">https://eifu.lemaitre.com</a>	Sterilisé au gaz d'oxyde d'éthylène
Nederlands	Verklaring van de symbolen	Gedistribueerd door Let op: Krachtens federale en andere wetgeving in de Verenigde Staten mag dit product slechts door of in opdracht van een arts worden verkocht.	Niet gebruiken als de verpakking is geopend of beschadigd	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing: <a href="https://eifu.lemaitre.com">https://eifu.lemaitre.com</a>	Sterilizzato con ossido di etilene
Ελληνικά	Λεξάρτα συμβόλου Διανομέας	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή και διλή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο σε λατρό ή κατ' ευτολήν ατρού.	Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά.	Συμβουλεύετε το φιλλάρδο ο διηγιών χρησης: <a href="https://eifu.lemaitre.com">https://eifu.lemaitre.com</a>	Esterilizado con óxido de etileno

REF	LOT	☒	⚡	⊗	☀️	☔	👑
English	Catalog Number	Batch Code	Use-by Date	Date of Manufacture	Do not re-use	Keep away from sunlight	Manufacturer
Deutsch	Katalognummer	Chargen-Code	Verfallsdatum	Herstellungsdatum	Nicht wieder verwenden	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Herssteller
Français	Numéro de catalogue	Code du lot	Date limite d'utilisation	Date de fabrication	Ne pas réutiliser	Conserver à l'abri du soleil	Fabricant
Italiano	Numero di catalogo	Codice del lotto	Utilizzare entro	Data di produzione	Non riutilizzare	Tenere lontano dalla luce del sole	Produttore
Español	Número de catálogo	Código de lote	Fecha de caducidad	Fecha de fabricación	No reutilizar	Mantener alejado de la luz solar	Fabricante
Português	Número de catálogo	Código de lote	Data de validade	Data de fabrico	Uso único	Mantener alejado de la luz solar	Fabricante
Dansk	Katalognummer	Partikode	Holdbarhedsdato	Produktionsdato	Engangsdrug	Holdes væk fra sollys	Producent
Svensk	Katalognummer	Satskod	Utgångsdatum	Tillverkningsdatum	Äteranvänt inte	Förvaras mörkt	Tillverkare
Nederlands	Catalogusnummer	Lotcode	Houdbaarheidsdatum	Fabricagedatum	Niet hergebruiken	Verwijderd houden van de zon	Fabrikant
Ελληνικά	Αριθμός καταλόγου	Κωδικός παρτίδας	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατασκευής	Μίας χρήσης	Φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως	Κατασκευαστής



LeMaitre Vascular, Inc.  
Customer Service:  
Tel: (781) 221-2266  
Fax: (781) 221-2223

LeMaitre Vascular GK  
1F Kubodera Twin Tower Bldg.  
2-9-4 Kudan-minami, Chiyoda-ku  
Tokyo 102-0074, Japan  
Tel: +81-(0)3-5215-5681

LeMaitre Vascular ULC  
9135 Keele Street, Suite B6  
Vaughan, Ontario  
Canada L4K 0J4  
Tel: 855-673-2266



LeMaitre Vascular GmbH  
Otto-Volger-Str. 5a/b  
65843 Sulzbach/Ts., Germany  
Tel: +49-(0)6196-659230



LeMaitre Vascular, Inc.  
63 Second Avenue  
Burlington, MA 01803

LeMaitre is a registered trademark, and Periscope is a trademark, of LeMaitre Vascular, Inc.

©2018 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.

R1799-01 Rev.J 03/18

